




HEALTH IS WHAT WE REPRESENT



CURED CATALOGUE
2024 (FARSI) v.4

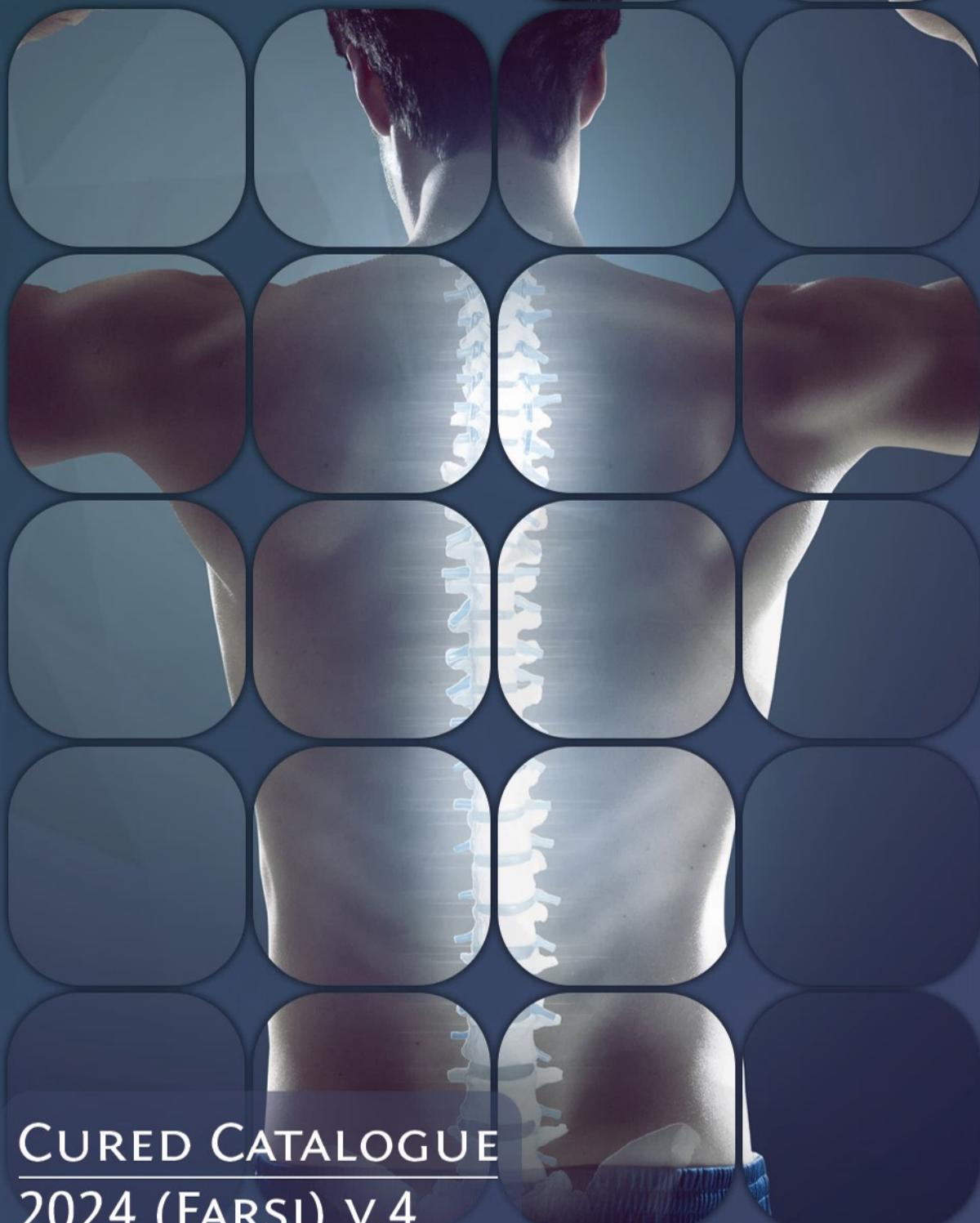

روزمه شرکت سپید تن پرنیان پویش:

شرکت تعاونی دانش بنیان سپید تن پرنیان پویش مستقر در پارک علم و فناوری گلستان تحت برند CURED به شماره ثبت ۱۰۵۶۴ در سال ۱۳۹۲ تاسیس گردید و فعالیت تولیدی خود را با طراحی و ساخت انواع ارتزیوتراپی و توانبخشی در استان زیبای گلستان در شمال ایران آغاز کرد. از آنجاییکه این شرکت از ابتدا معهده به ارائه محصولات نوآورانه و منطبق با استاندارهای روز دنیا بوده با تیمی از متخصصان ارتز و پروتز در بخش تحقیق و توسعه خود همکاری نزدیک دارد. در سال ۲۰۲۰، پس از اپیدمی کووید-۱۹ در سراسر جهان، با رویکرد جلوگیری از همه گیری این بیماری در سراسر جهان، وظیفه خود دانستیم انواع ماسک های پزشکی تخصصی مانند ماسک های جراحی سه لایه، N99، N95 و ماسکهای نوین الکترونیکی فن دار را تولید نماییم. بنابراین، تیم تحقیق و توسعه خود را گسترش داده و با رویکرد خودکفایی در توسعه تولید ماسک های پزشکی تخصصی، اقدام به ساخت ماشین آلات خط تولید ماسک نموده و سه خط تولید جدید برای تولید انواع ماسک ها و ماشین آلات تخصصی پزشکی و فیلترهای نانو را به خطوط تولید خود اضافه نمودیم. علاوه بر تمامی این خطوط تولید، خط جدید تولید پارچه های نانو فیلتراسیون به روش الکتروریسی را با هدف خودکفایی در تولید پارچه های فیلتراسیون تخصصی با فناوری نانو جهت استفاده در ماسک های پزشکی، هپا و سایر فیلترهای تخصصی پزشکی راه اندازی نمودیم. ما امروز در ساخت ماشین آلات تولید ماسک، پارچه های فیلتراسیون و انواع ماسک های پزشکی خودکفا هستیم و می توانیم در مبارزه با بیماری های همه گیر مانند کووید-۱۹ سهمی داشته باشیم.

شرکت سپید تن پرنیان پویش با اخذ گواهینامه های بین المللی مدیریت کیفیت ISO13485 ISO9001 و GMP از شرکت BRS آمریکا استانداردهای بین المللی لازم را در خط تولید خود پیاده سازی نموده است. همچنین ما با بررسی عملکردی و بالینی محصولات در مراکز علمی و دانشگاههای معتبر ایران توانسته ایم تاییدیه سلامت محصولات را دریافت نموده که گویایی اثر بخشی فعالیتهای علمی در این سازمان می باشد. در حال حاضر این شرکت موفق به دریافت پروانه های ساخت وسایل پزشکی در شش گروه تخصصی شامل:

۱- فیزیوتراپی و توانبخشی

۲- گروه تجهیزات طب اورژانس (شامل محصول ثبت کننده آنی لگن بعد از ترومای (TPOD) و کولار گردنی طبی)

۳- گروه دستگاه ها و لوازم عمومی پزشکی و باندراها

۴- گروه البسه پزشکی

۵- گروه ماسک های فیلتردار (شامل انواع ماسک N95, N99, Electric Fan Mask)

۶- گروه ماسک های جراحی از سازمان غذا و دارو (IFDA) وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور گردیده است. این شرکت در سال ۱۳۹۳ عضو انجمن صنفی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی و آزمایشگاهی کشور گردید و از سال ۱۳۹۴ با دریافت مجوز واحد فناور از پارک علم و فناوری استان گلستان در حال فعالیت می باشد.

این شرکت به منظور رفع نیاز مشتریان، اقدام به بررسی و امکان سنجی ارائه محصولات به روز، زیر نظر کارشناسان مجروب، با هدف ساخت محصولاتی با کیفیت بالا نموده است. امروزه ترکیب فناوری پیشرفته و تحقیق و توسعه متمرکز و ایده های نوآورانه در کنار و ارتباطات موثر، قیمت های رقابتی و تیم حرفه ای این شرکت را قادر ساخته است تا به عنوان یک شرکت دانش بنیان در حوزه های نوین پزشکی اقدام به تولید محصول نوآورانه نماید.

خط مشی ما این است که بتوانیم با تولید محصولات با کیفیت سلامتی را به همه جوامع هدیه نماییم.

"Health is what we represent." سلامتی هدیه ماست.

ستون فقرات

ستون فقرات دارای سه بخش اصلی گردنی، سینه‌ای و کمری است. هفت مهره‌ی گردنی، دوازده مهره‌ی سینه‌ای و پنج مهره‌ی کمری ستون فقرات را تشکیل می‌دهند.

مهره‌های گردنی (Cervical Vertebrae): عملکرد اصلی مهره‌های گردنی یا ستون فقرات گردنی تحمل وزن سر (حدود ۵ کیلوگرم) است. این ۷ مهره گردنی از C1 تا C7 شماره گذاری شده‌اند. گردن به دلیل اتصال دو مهره ویژه به جمجمه بالا ترین دامنه حرکتی را دارد. مهره C1 حلقوی بوده، اطلس نام داشته و به صورت مستقیم به جمجمه متصل می‌شود. این اتصال امکان انجام حرکت آری و تایید را با سر به افراد می‌دهد. مهره دوم C2 اکسیس (آسه) نام داشته و دارای یک برجستگی به نام زائده دندانی است که مهره اطلس بر روی آن می‌چرخد. این مهره امکان انجام حرکت نه و چرخش سر به اطراف را می‌دهد.

مهره‌های سینه‌ای (Thoracic Vertebrae): عملکرد اصلی ناحیه سینه‌ای نگه داشتن قفسه سینه و محافظت از قلب و ریه هاست. ۱۲ مهره سینه‌ای از T1 تا T12 نام گذاری می‌شوند. دامنه حرکت در ناحیه سینه‌ای محدود است.

مهره‌های کمری (Lumbar Vertebrae): در رابطه با مهره کمر باید گفت که عملکرد اصلی ناحیه کمری، تحمل وزن بدن است. ۵ مهره ناحیه کمری از L1 تا L5 نام گذاری می‌شوند. این مهره‌ها از نظر اندازه بسیار بزرگ‌تر هستند که دلیل آن نیز جذب فشار ناشی از بلند کردن و حمل اجسام سنگین است.



Cervical spine

C 1	Atlas
C 2	Axis
C 3	3. Cervical vertebrae
C 4	4. Cervical vertebrae
C 5	5. Cervical vertebrae
C 6	6. Cervical vertebrae
C 7	7. Cervical vertebrae


Thoracic spine

Th 1	1. Thoracic vertebrae
Th 2	2. Thoracic vertebrae
Th 3	3. Thoracic vertebrae
Th 4	4. Thoracic vertebrae
Th 5	5. Thoracic vertebrae
Th 6	6. Thoracic vertebrae
Th 7	7. Thoracic vertebrae
Th 8	8. Thoracic vertebrae
Th 9	9. Thoracic vertebrae
Th 10	10. Thoracic vertebrae
Th 11	11. Thoracic vertebrae
Th 12	12. Thoracic vertebrae

Lumbar spine

L 1	1. Lumbar vertebrae
L 2	2. Lumbar vertebrae
L 3	3. Lumbar vertebrae
L 4	4. Lumbar vertebrae
L 5	5. Lumbar vertebrae

Spine Cervical

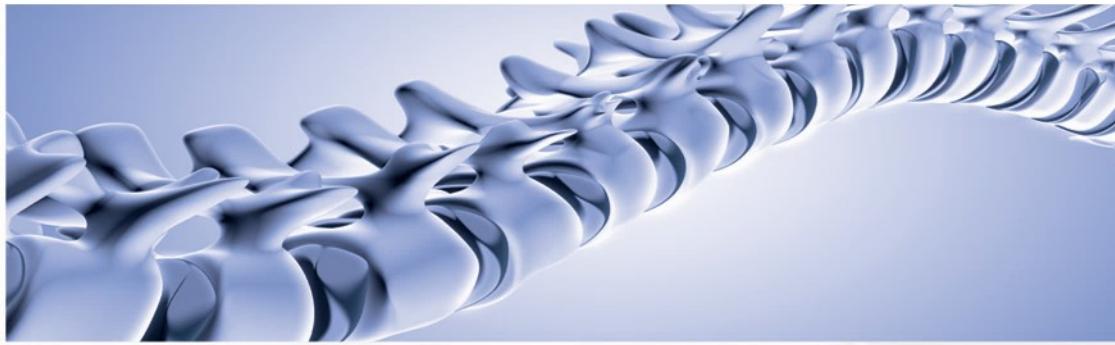

Soft Collar Cervical Collar

Comfortable
Protection &
Covered with two
layers of fabric
Code: 1201



با روکش پنبه‌ای، با برش منحنی شکل در قسمت
قرارگیری چانه.

• موجود در سه ارتفاع: ۷,۵ سانتی متر (۲,۹۵ اینچ)، ۹ سانتی
متر (۳,۵۴ اینچ)، ۱۰,۵ سانتی متر (۴,۱۳ اینچ) برای افراد
دارای ارتفاع گردن متفاوت.


مواد سازنده:
فوم TDI، الاستیک، پلی استر، نایلون
جدول سایز بندی:

برای اندازه گیری ارتفاع گردن، چشم ها باید مستقیم به
جلونگاه کنند، سپس فاصله بین لبه جناغ و فک پایین را
با گردن در وضعیت طبیعی و آناتومیک گردن اندازه گیری
کنید. برای اندازه گیری سایز محصول، دور گردن را ز روی
«سیب آدم» اندازه بگیرید.

ارتفاع چانه: ۷,۵ سانتی متر (۲,۹۵ اینچ)، ۹ سانتی متر (۳,۵۴
اينچ)، ۱۰,۵ سانتی متر (۴,۱۳ اينچ) موجود مibاشد.

H = ارتفاع چانه.
C = دور گردن.

S	32-36cm (12.59-14.17")
M	36-40cm (14.17-15.74")
L	40-44cm (15.74-17.32")
XL	44-48cm (17.32-18.89")
2XL	48-52cm (18.89-20.47")

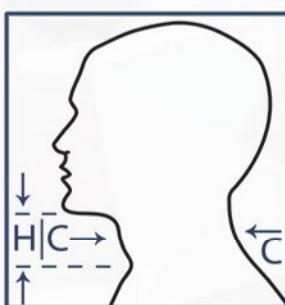

نام محصول:

کولار نرم

مشخصات:

کولار نرم کیورد به صورت ویژه ای طراحی شده است
تا با ایجاد یک حمایت انعطاف پذیر با پد بالشتی در
اطراف گردن باعث کنترل فشار بر مهره های گردنی
گردد. این محصول در مراحل اولیه خدمات خفیف
گردنی به ریکاوری و استراحت عضلات گردنی کمک
میکند. این محصول کمک میکند تا حرکت گردن
کنترل شده، بنابراین حرکات بیش از حد یا ناخواسته
گردن کاهش یابد و عضلات و تاندون ها بیش از حد
کشیده نشوند. ابر نرم بکار رفته در داخل این محصول
به آن اجزاء می دهد تا به راحتی در روی استخوان های
ترقوه و زیر چانه شکل و حالت بگیرد.

موارد استفاده:

• اسپوندیلوزیس گردنی

• HIVD (فقی دیسک بین مهره ای)

• کوفتگی در ناحیه مهره های گردنی ستون فقرات

• کشیدگی و یارگ به رگ شدن عضلات گردن

• محافظت از گردن بعد از عمل (تشخیص پزشک)

ویژگی ها:

• ایجاد محدودیت حرکتی مهره های گردنی.

• قابل استفاده راحت در طی روز یا شب.

• از مهره های گردنی در موقعیت خنثی یا آناتومیک
پشتیبانی می کند.

• ساخته شده از فوم با ضخامت ۲۵ میلی متر، پوشانده شده

Spine Cervical



Semi Rigid Splint

Cervical Collar

Comfortable
Protection &
Covered with two
layers of fabric
Code: 1202



نام محصول:

اسپلینت کولار نیمه سخت

مشخصات: اسپلینت کولار نیمه سخت کیورد به صورت ویره‌ای طراحی شده است تا در نتیجه آن آسیب خفیف تا متوسط عضله، رباط و تاندون گردنی از طریق قرار دادن پد بالشتی در اطراف آن محافظت گردد. همچنین این گردنبد می‌تواند برای کمک به قرار گرفتن گردن در وضعیت آناتومیک استفاده شود. این محصول با کاهش حرکت گردن و کمک به اطمینان از عدم فشار بیش از حد به عضلات و تاندون‌ها، موجب می‌شود عضلات گردن استراحت کرده و ریکاوری گردد. همچنین، پنل پلی اتیلنی این محصول را می‌توان جدا کرد تا امکان افزایش تدریجی دامنه حرکتی گردهم گردد. این سیستم مدولار برای درمان قبل از عمل، پس از عمل و توانبخشی ناحیه گردن ایده‌آل است.

موارد استفاده:

• آرتروز

• اسپوندیلوزیس گردنی

• HIVD (فتق دیسک بین مهره‌ای)

• کوفنگی در ناحیه مهره‌های گردنی ستون فقرات

• کشیدگی و یا رگ به رگ شدن عضلات گردن

• محافظت از گردن بعد از عمل (تشخیص پزشک)

ویژگی‌ها:

• این کولار گردنی به شکل آناتومیک گردن طراحی شده است.

• از مهره‌های گردنی ستون فقرات در وضعیت آناتومیک حمایت می‌کند.

• ابر نرم بکار رفته در ساختار این محصول در کنار اسپلینت

پلی اتیلنی تقویت کننده متصل به آن امکان ایجاد یک

حمایت مطمئن را برای کسانی که در ناحیه گردنی دچار بی‌ثباتی شده اند، فراهم می‌سازد.

• پنل پلاستیکی اسپلینت، به صورت تدریجی و با تجویز پژوهش می‌تواند جهت افزایش دامنه حرکتی گردن از این محصول جدا شود. این محصول در ۳ ارتفاع در دسترس می‌باشد. (۴، ۱۳" (۱۰.۵cm)، (۳.۵cm)، (۲.۹cm)، (۹cm) (۷.۵cm))

مواد سازنده:

فوم TDI، الاستیک، پلی استر، نایلون، پلی اتیلن

جدول سایز بندی:

برای اندازه گیری ارتفاع گردن، چشم‌ها باید مستقیم به جلو نگاه کنند، سپس فاصله بین لبه جناح و فک پایین را با گردن در وضعیت طبیعی و آناتومیک گردن اندازه گیری کنید. برای اندازه گیری سایز محصول، دور گردن را از روی «سبی آدم» اندازه بگیرید.

ارتفاع چانه: ۷.۵ سانتی متر (۲.۹۵ اینچ)، ۹ سانتی متر (۳.۵۴)

اینچ)، ۱۰.۵ سانتی متر (۴.۱۳ اینچ) موجود می‌باشد.

H = ارتفاع چانه.

C = دور گردن.


S 32-36cm (12.59-14.17")

M 36-40cm (14.17-15.74")


L 40-44cm (15.74-17.32")

XL 44-48cm (17.32-18.89")

2XL 48-52cm (18.89-20.47")

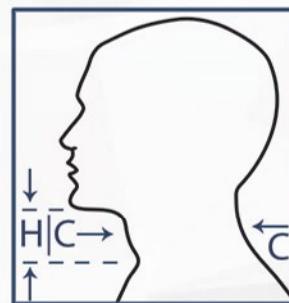

Spine Cervical

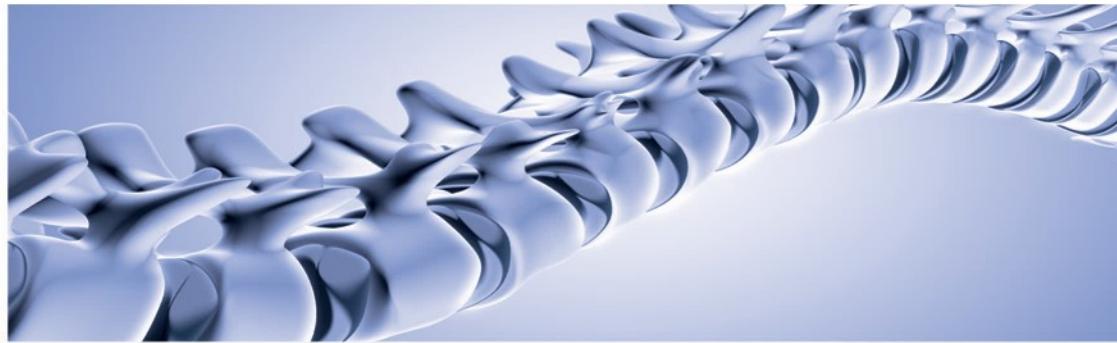

Hard ADJ Cervical Collar

Comfortable
Protection
Code: 1301



ویژگی ها:

- مهره های گردنی را در وضعیت آناتومیک قرار می دهد.
- این محصول از نظر وزنی بسیار سبک است.

بدنه پانچ شده محصول، تهییه پوست را در زمان استفاده بهبود می بخشد، راحتی و رضایت بیمار را افزایش می دهد.

این کولار گردنی دارای قابلیت تنظیم ارتفاع است.

مواد سازنده:
پلی اتیلن، فوم، نایلون، پلی استر

جدول سایز بندی:

برای اندازه گیری ارتفاع گردن، چشم ها باید مستقیم به جلو نگاه کنند، سپس فاصله بین لبه جناغ و فک پایین را با گردن در وضعیت طبیعی و آناتومیک گردن اندازه گیری کنید. برای اندازه گیری سایز محصول، دور گردن را از روی «سب آدم» اندازه بگیرید.

ارتفاع چانه: ۷.۵ سانتی متر (۲.۹۵ اینچ)، ۹ سانتی متر (۳.۵۴ اینچ)، ۱۰.۵ سانتی متر (۴.۱۳ اینچ) موجود میباشد.


H = ارتفاع چانه.
C = دور گردن.

M

30-44cm (11.81-17.32")

L

34-48cm (13.38-18.89")

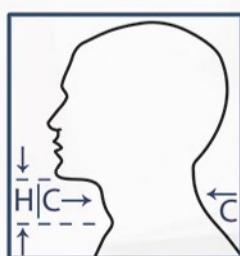

نام محصول:

کولار سخت (قابل تنظیم)

مشخصات:

کولار سخت قابل تنظیم کیورد برای حمایت، بسیار حرکت کردن یا تنظیم گردن در وضعیت های حرکتی مختلف گردن از جمله فلکشن (خم شدن به سمت بدن)، اکستشن (خم شدن به سمت بیرون یا باز شدن) یا هایپر اکستشن (الخم شدن به سمت بیرون یا باز شدن بیشتر از شرایط عادی) استفاده می شود. این گردن بد با کاهش دامنه حرکتی گردن و اطمینان از اینکه عضلات و تاندون ها بیش از حد کشیده نشده اند، به استراحت و بازیابی عضلات گردن کمک می کند. شکل آناتومیکی، قابلیت تنظیم ارتفاع و لایه فوم لبه، باعث افزایش نرمی محصول و راحتی کاربر میشوند. این محصول برای قرار گرفتن راحت در بالای استخوان ترقوه و زیر چانه طراحی شده و به کاهش فشار گرانشی ناشی از وزن سر بر روی گردن کمک می کند. این کولار در مواردی که نیاز به بی حرکتی زیاد در ناحیه گردن میباشد توصیه می شود.

موارد استفاده:

• آرتروز

• شکستگی گردن

• اسپوندیلوزیس گردنی

• HIVD (فقط دیسک بین مهره ای)

• کوفتگی در ناحیه مهره های گردنی ستون فقرات

• کشیدگی و یا رگ به رگ شدن عضلات گردن

• محافظت از گردن بعد از عمل (تشخیص پزشک)

Spine Cervical



Philadelphia Cervical Collar

Used in Hospitals

Code: 1101
(Tracheostomy & MRI Compatible)

Code: 1102
(MRI Compatible)



نام محصول:

گردنبند فیلادلفیا

مشخصات:

گردنبند فیلادلفیا، بریس سختی است که برای جلوگیری از حرکات سر و گردن بعد از آسیب، مورد استفاده قرار می‌گیرد. گردنبند فیلادلفیا از عضلات گردن محافظت می‌کند و سبب بهبودی عضلات و لیگامانت های گردنی می‌شود. زمانی که افراد دچار آسیب سر یا گردن می‌شوند، ممکن است شکستگی گردن رخ داده باشد. این موضوع آنها را در معرض خطر آسیب نخاعی قرار می‌دهد که ممکن است بر اثر حرکت شدید منجر به معلویت یا مرگ شخص شود. این گردنبند که از فوم ساخته شده، دارای آتلی سخت با نگهدارندگی بالا بوده و قسمت جلویی آن دارای قطعه ای است که چانه رانگه داشته و قسمت پشتی بصورت منحنی و متناسب با آنatomی سر میباشد. گردنبند فیلادلفیا بخش های بیشتری از مهره های ستون فقرات گردنی را نسبت به گردنبند طبی سخت و نرم پوشش می‌دهد، بنابراین محدودیت حرکتی بیشتر و ثبات بیشتری را اعمال می‌کند. این محصول در دو مدل **MRI** تولید می‌شود. مدل های ۱۱۰۱ و ۱۱۰۲ دارای سازگاری با **MRI** میباشند و مدل ۱۱۰۱ دارای یک دهانه برای دسترسی و انجام تراکستومی میباشد و به متخصصان اجازه می‌دهد که به سرعت به نبض شاهرگی دسترسی داشته باشند تا در مواقع اضطراری در حالیکه عمل تراکستومی یا جراحی بر روی نای انجام میدهند، گردن را بدون حرکت نگهدارند.

موارد استفاده:

- اسپوندیلوزیس گردنی
- HIVD (فتق دیسک بین مهره ای)
- کوفتگی در ناحیه مهره های گردنی ستون فقرات
- کشیدگی و یا رگ به رگ شدن عضلات گردن
- محافظت از گردن بعد از عمل (تشخیص پزشک)
- بیماری های دیسک گردن
- شکستگی ستون فقرات گردن
- جابجایی و لغزش مهره ها
- بعد از جراحی های ستون فقرات گردن

مواد سازنده:


فوم، EVA، پلی اتیلن، پلی استر، نایلون

جدول سایز بندی:

برای اندازه گیری سایز محصول، دور گردن را از روی «سیب آدم» اندازه بگیرید. اگر سایز بدست آمده بین دو سایز بود سایز بزرگتر را انتخاب نمایید.

C = دور گردن.

XS	28-32 cm (11.02-12.59")
S	32-36 cm (12.59-14.17")
M	36-40 cm (14.17-15.74")
L	40-44 cm (15.74-17.32")
XL	44-48 cm (17.32-18.89")

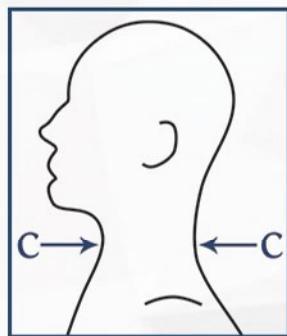

Spine Thoracic




Posture Brace W/Steel Stay

Two
Flexible Stays
Code: 3101



- پیکربندی مثلثی شکل این محصول به درستی فشار را به نوک شانه تقسیم می کند.
 - بند های ضربدری شکل محصول حمایت بیشتری را فراهم می کند و تنظیم محصول را آسان می سازد.
 - به علت ضخامت کم می توان آنرا زیر لباس های روزمره پوشید.
- مواد سازنده:**
نئوبرن، نایلون، کتان، پلی استر، استیل
جدول سایز بندی:
دور قفسه سینه خود را مطابق شکل اندازه بگیرید.

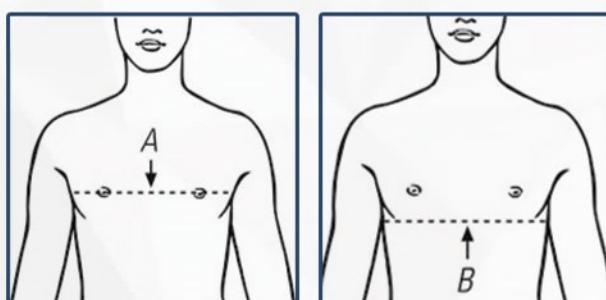

الف = مردان: دور سینه را از بالای سینه اندازه گیری نمایید.

S	64-74 cm (25.20-29.13")	XL	94-104 cm (37.01-40.94")
M	74-84 cm (29.13-33.07")	2XL	104-114 cm (40.94-44.88")
L	84-94 cm (33.07-37.01")	3XL	114-124 cm (44.88-48.81")

نام محصول:

کتف قوز بند آتل دار نئوبرنی

مشخصات:

کتف قوز بند کیورد برای کمک به درمان کایفوز و قوزی در مراحل اولیه ابتلا، از طریق ایجاد توازن و تعادل صحیح ستون فقرات طراحی شده است. این محصول از خم شدن بیش از حد به جلو و انحنای ستون فقرات در قسمت فوقانی (سینه ای) به جلو، جلوگیری می کند. ایستایی و در عین حال انعطاف پذیری همراه با طراحی آنatomیک این محصول، به حمایت از ماهیچه ها، رباط ها و تاندون ها کمک می کند و وضعیت بدنی را در حالت طبیعی حفظ می کند. همچنین این محصول می تواند با حمایت از بافت های نرم و توزیع یکنواخت نیرو در ناحیه ستون فقرات، به کاهش درد و اسپاسم عضلانی کمک کند. این محصول قابل تنظیم است و می توان آن را زیر لباس های روزمره پوشید.

موارد استفاده:

- افتادگی شانه ها
- خمیدگی پشت
- ضعف عضلات کتف


• نگهداری ستون فقرات در وضعیت صحیح
ویژگی ها:

- آتل های استیل انعطاف پذیر بکار رفته در این محصول به تقویت توازن قسمت فوقانی ستون فقرات و حفظ وضعیت مناسب کمک می کند و از خمیدگی جلوگیری می کند.

Spine Thoracic



مواد سازنده:
نایلون، پلی استر، پلی اتیلن، فلز، فوم، کتان، ابر
جدول سایز بندی:
دور قفسه سینه خود را مطابق شکل اندازه بگیرید.

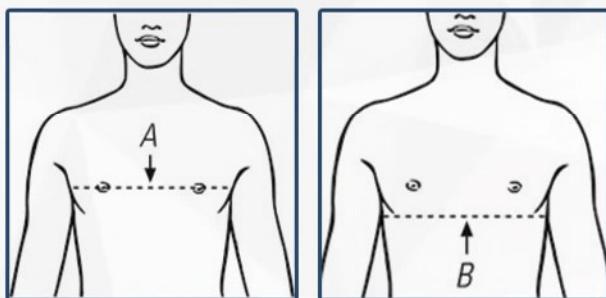

الف = مردان: دور سینه را از بالای سینه اندازه گیری نمایید.

S	65-80 cm (5.59-31.49")	XL	110-125 cm (43.30-49.21")
M	80-95 cm (1.49-37.40")	2XL	125-140 cm (49.21-55.11")
L	95-110 cm (37.4-43.30")		


نام محصول:
بانداز ترقوه
مشخصات:
بانداز ترقوه کیورد یک حمایت کننده و نگهدارنده کاربردی و بسیار راحت ترقوه است. ساختار آن بگونه ای است که پس از بسته شدن، شانه ها را به سمت عقب می کشد تا شکستگی استخوان ترقوه را هم تراز کند و وضعیت حمایتی مورد نیاز را ایجاد کند. یک حلقه فلزی در بخش عبور بندها در قسمت پشتی قرار گرفته است و وضعیت مناسب آناتومیک را پس از پوشیدن محصول ایجاد می کند. این ساختار به بیمار این امکان را می دهد تا حتی در حالت خوابیده نیز احساس راحتی کند.
موارد استفاده:

- بعد از شکستگی استخوان ترقوه
- محافظت بعد از عمل جراحی
- ضعف عضلات کتف

ویژگی ها:

- از فوم سبک و بادوام با پوشش پارچه تنفسی ساخته شده است.
- دارای بند های شانه ای پهن با پدهای شانه ای که بیحرکتی مناسب را فراهم و راحتی بیمار را افزایش می دهد.
- دارای بند های چسبی زبر و نرم برای تنظیم آسان.
- بند چسبی پشتی برای کنترل سفتی و تنظیم ارتفاع با حرکت پایین به بالا مورد استفاده قرار میگیرد.
- مناسب برای بزرگسالان و کودکان.

Spine & Abdominal

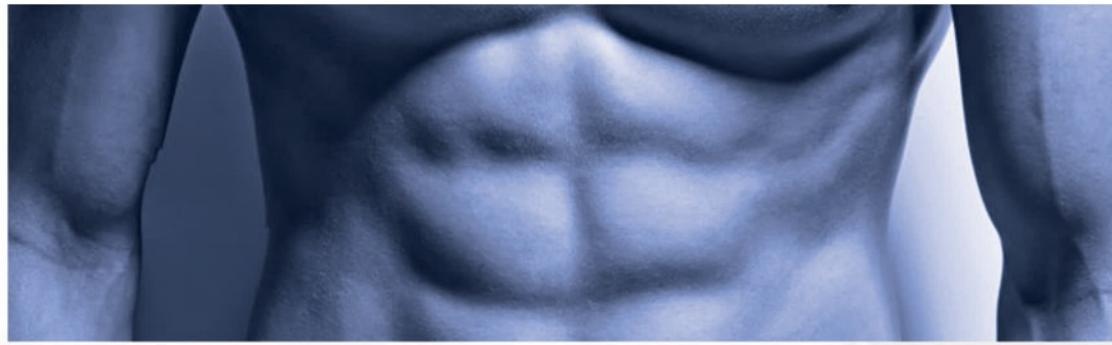

Abdominal Binder W/Compression Strap

Used in Hospitals
Code: 4202




- کش ساپورتی، فشرده سازی اضافی را فراهم می کند.
- ارتفاع محصول ۲۵۰ میلی متر است.
- طراحی عمومی مناسب برای مردان و زنان.

مواد سازنده:

الاستیک، نایلون، پلی استر، پلی اتیلن

جدول سایز بندی:

دور شکم و کمر خود را اندازه بگیرید.

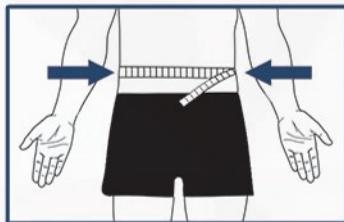

S	70-80 cm (27.56-31.50")	2XL	110-120 cm (43.31-47.24")
M	80-90 cm (31.50-35.43")	3XL	120-130 cm (47.24-51.18")
L	90-100 cm (39.43-39.37")	4XL	130-140 cm (51.18-55.12")
XL	100-110 cm (39.37-43.31")	5XL	140-150cm (55.12-59.06")

نام محصول:

شکم بند الاستیک تنفسی با کش ساپورتی

مشخصات:

شکم بند الاستیک تنفسی با کش ساپورتی کیورد برای کاهش کشیدگیهای لیگامانی در حرکات خمشی و پیچشی به جلو و عقب طراحی شده است. این محصول، برای استفاده پس از جراحی ایده آل است. بادوامی، انعطاف پذیری و کشسانی، به گرم کردن ماهیچه های گرفته، دردناک و خسته کمک می کند و می تواند به کاهش اسپاسم عضلانی در کشیدگی های حاد یارگ به رگ شدن کمر از طریق حمایت قابل تنظیم کمک نماید. سوراخهای کش تنفسی جریان هوای عالی را برای کاهش تعریق فراهم می کند و کش دوبل محصول امکان تنظیم حمایت را از کم تا زیاد فراهم می کند.

موارد استفاده:

- بعد از عمل جراحی در ناحیه شکمی
- کشیدگی عضلانی / رگ به رگ شدن
- بعد از زایمان

ویژگی ها:

- خستگی و فشار عضلانی را کاهش می دهد.
- ایده آل برای استفاده پس از جراحی.
- طراحی شده تا شکم را لیفت و آراسته نماید
- به علت ضخامت کم می توان آنرا زیر لباس های روزمره پوشید.

- کش قابل تنفس و توری برای کاهش تعریق.
- کش های ساپورتی حمایت قابل تنظیم را از کم تا زیاد فراهم می کنند.



Abdominal Binder w/Compression Strap (Free Size)

Used in Hospitals
Code: 42021




- کش ساپورتی، فشرده سازی اضافی را فراهم می کند.
- ارتفاع محصول ۲۵۰ میلی متر است.
- طراحی عمومی مناسب برای مردان و زنان.
- محصول تک سایز است (یک سایز برای اکثر افراد مناسب است)

مواد سازنده:

الاستیک، نایلون، پلی استر، پلی اتیلن

جدول سایز بندی:
دور شکم و کمر خود را اندازه بگیرید.

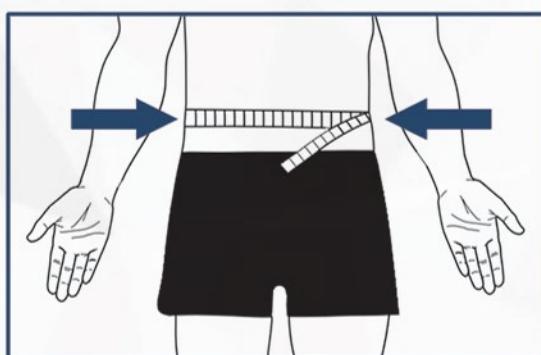

F

70-120 cm (27.56-47.24")

نام محصول:
شکم بند الاستیک تنفسی با کش ساپورتی (تک سایز)

مشخصات:
شکم بند الاستیک تنفسی با کش ساپورتی کیورد برای کاهش کشیدگیهای لیگامانی در حرکات خمشی و پیچشی به جلو و عقب طراحی شده است. این محصول، برای استفاده پس از جراحی ایده آل است. بادوامی، انعطاف پذیری و کشسانی، به گرم کردن ماهیچه های گرفته، دردناک و خسته کنمک می کند و می تواند به کاهش اسپاسم عضلانی در کشیدگی های حاد یارگ به رگ شدن کمر از طریق حمایت قابل تنظیم کمک نماید. سوراخهای کش تنفسی جریان هوای عالی را برای کاهش تعريق فراهم می کند و کش دوبل محصول امکان تنظیم حمایت را از کم تا زیاد فراهم می کند.

موارد استفاده:

- بعد از عمل جراحی در ناحیه شکمی
- کشیدگی عضلانی / رگ به رگ شدن
- بعد از زایمان

ویژگی ها:

- خستگی و فشار عضلانی را کاهش می دهد.
- ایده آل برای استفاده پس از جراحی.
- طراحی شده تا شکم را لیفت و آراسته نماید
- این محصول تک سایز بوده و به علت ضخامت کم می توان آنرا زیر لباس های روزمره پوشید.
- کش قابل تنفس و توری برای کاهش تعريق.
- کش های ساپورتی حمایت قابل تنظیم را از کم تا زیاد فراهم می کنند.

Spine & Abdominal

Neoprene Waist Trimmer

Code: 4101




- به علت ضخامت کم می توان آنرا زیر لباس های روزمره پوشید.
- طراحی عمومی مناسب برای مردان و زنان.

مواد سازنده:

نئوپرن، کتان، نایلون، پلی استر

جدول سایز بندی:

دور کمر و شکم خود را اندازه بگیرید.

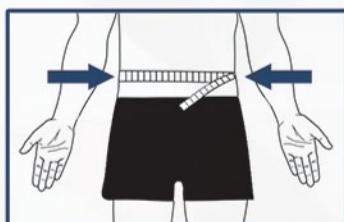

S

70-80 cm (27.56-31.50")

2XL

110-120 cm (43.31-47.24")

M

80-90 cm (31.50-35.43")

3XL

120-130 cm (47.24-51.18")

L

90-100 cm (39.43-39.37")

4XL

130-140 cm (51.18-55.12")

XL

100-110 cm (39.37-43.31")

5XL

140-150cm (55.12-59.06")

نام محصول:

شکم بند نئوپرنی

مشخصات:

شکم بند نئوپرنی کیورد برای کاهش کشیدگیهای لیگامانی در حرکات خمشی و پیچشی به جلو و عقب طراحی شده است. این محصول، برای استفاده پس از جراحی ایده آل است. بادوامی، انعطاف‌پذیری و کشسانی، به گرم کردن ماهیچه های گرفته، دردناک و خسته کمک می کند و می تواند به کاهش اسپاسم عضلانی در کشیدگی های حاد یا رگ به رگ شدن کمر از طریق حمایت قبل تنظیم کمک نماید.

موارد استفاده:

- جلوگیری از افتادگی شکم.
- کشیدگی عضلانی ارگ به رگ شدن
- طراحی شده تا شکم را لیفت و آراسته نماید.
- بعد از جراحی در ناحیه شکمی.

ویژگی ها:

- سبک و راحت.
- قابل شستشو.
- مناسب با ناحیه شکمی.
- استفاده از مواد سازنده با کیفیت.
- قابلیت تنظیم راحت بر روی شکم.
- خستگی و فشار عضلانی را کاهش می دهد.
- طراحی شده تا شکم را لیفت و آراسته نماید.

Spine Lumbar




Low Profile Industrial Back Support

w/Shoulder
Straps
Code: 5203

مواد سازنده:
الاستیک، نایلون، پلی استر، پلی اتیلن

نام محصول:
کمریند کار با استربپ شانه ای الاستیک

جدول سایز بندی:
دور کمر و شکم خود را اندازه بگیرید.

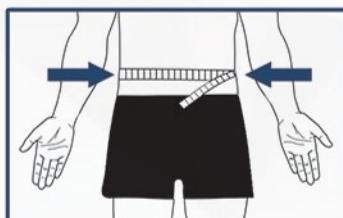

مشخصات:
کمریند کار با استربپ شانه ای کیورد حداکثر سطح پشتیبانی را برای کمر شما فراهم می کند. این کمریند دارای کش های جانبی محکم است که ایجاد فشار قابل تنظیم و حمایت از کمر را فراهم می سازد. طراحی خاص این محصول به شما این امکان را می دهد که بدون احساس ناراحتی تمام بدن خود را حرکت دهید. این کمریند، نگهدارنده مناسب کمر هنگام ورزش و کار سخت بوده و حمایت و ایستایی لازم را فراهم می کند.

S	70-80 cm (27.56-31.50")	2XL	110-120 cm (43.31-47.24")
M	80-90 cm (31.50-35.43")	3XL	120-130 cm (47.24-51.18")
L	90-100 cm (39.37-39.37")	4XL	130-140 cm (51.18-55.12")
XL	100-110 cm (39.37-43.31")	5XL	140-150cm (55.12-59.06")

موارد استفاده:
• حمایت از قسمت پستانی کمر طی انجام فعالیت های سنگین
• محافظت از مهره ها و دیسک کمر در طول انجام کار
• درد های کمر به دلیل نشستن ها و ایستادن های مدام
• کشیدگی عضلانی / رگ به رگ شدن

ویژگی ها:
• دارای سه آتل انعطاف پذیر در پشت جهت حمایت و ثبات بیشتر.
• می توان آن را زیر لباس های روزمره پوشید.
• به تسکین درد کمر کمک می کند.
• به راحتی قابل استفاده است.

Spine Lumbar

Sacro Lumbar Belt w/Power Straps


Four Splints
Code: 5204(27cm)
Code: 5205(30cm)



- بندهای کشی ساپورتی به حمایت و ایجاد فشار بیشتر کمک می کنند.
- ارتفاع پشتی کمریند در دو مدل ۲۷ و ۳۰ سانتی متر عرضه می گردد.
- ارتفاع کمریند در قسمت جلویی (روی شکم) با هدف راحتی بیمار کوتاهتر و آناتومیک شده است.

مواد سازنده:
الاستیک، نایلون، پلی استر، پلی اتیلن

جدول سایز بندی:
دور کمر و شکم خود را اندازه بگیرید.

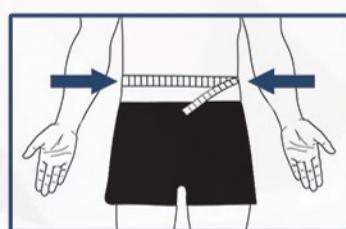

S	70-80 cm (27.56-31.50")	2XL	110-120 cm (43.31-47.24")
M	80-90 cm (31.50-35.43")	3XL	120-130 cm (47.24-51.18")
L	90-100 cm (39.37-39.37")	4XL	130-140 cm (51.18-55.12")
XL	100-110 cm (39.37-43.31")	5XL	140-150cm (55.12-59.06")

نام محصول:
کمریند طبی الاستیک تنفسی ۳۰ / ۲۷ سانتی متر با کش ساپورتی

مشخصات:

کمریند طبی الاستیک تنفسی با کش ساپورتی کیورد دارای چهار آتل انعطاف پذیر و کش ساپورتی است. این کمریند برای کمک به کاهش حرکات ناخواسته یا بیش از حد در قسمت پایین کمر طراحی شده است و برای افرادی که از کمردرد مزمن به دلیل ورزش های مکرر و فعالیت های شغلی سخت رنج می بزنند ایده آل است. مواد بادوام، قابل تنفس، انعطاف پذیر با قابلیت گرمایش درمانی به گرم شدن عضلات سفت، دردناک، خسته و آرتروز مفاصل کمک می کند. بستن کش های ساپورتی، فشار قابل تنظیم و محافظت و راحتی فراخور کمر شما را تضمین می کند.

موارد استفاده:

- اسپوندیلوز
- کمر درد
- اسپوندیلولیستزیس
- کشیدگی عضلانی / رگ به رگ شدن
- فتق دیسک بین مهره ای

ویژگی ها:

- استفاده از مواد اولیه تنفسی برای پوشش راحت.
- چهار آتل انعطاف پذیر پشتی، ستون فقرات را ساپورت نموده و امکان خمش و حرکت محدود را فراهم می کند.
- بندهای کشی ساپورتی به حمایت و ایجاد فشار بیشتر کمک می کنند.

Spine Lumbar




Sacro Lumbar Belt w/Power Straps (Econ.)

Four Splints
Code: 52042(27cm)
Code: 52052(30cm)

- بندهای کشی ساپورتی به حمایت و ایجاد فشار بیشتر کمک می کنند.
- ارتفاع پشتی کمریند در دو مدل ۲۷ و ۳۰ سانتی متر عرضه می گردد.
- ارتفاع کمریند در قسمت جلویی (روی شکم) با هدف راحتی بیمار کوتاه تر و آناتومیک شده است.

مواد سازنده:
الاستیک، نایلون، پلی استر، پلی اتیلن، فوم، EVA

جدول سایز بندی:
دور کمر و شکم خود را اندازه بگیرید.

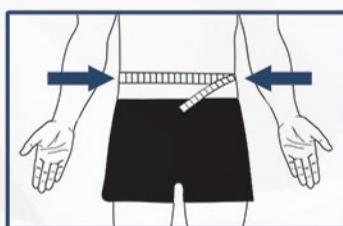

S	70-80 cm (27.56-31.50")	2XL	110-120 cm (43.31-47.24")
M	80-90 cm (31.50-35.43")	3XL	120-130 cm (47.24-51.18")
L	90-100 cm (39.43-39.37")	4XL	130-140 cm (51.18-55.12")
XL	100-110 cm (39.37-43.31")	5XL	140-150cm (55.12-59.06")

نام محصول:
کمریند طبی الاستیک تنفسی ۳۰ / ۲۷ سانتی متر با کش ساپورتی

مشخصات:

کمریند طبی الاستیک تنفسی با کش ساپورتی کیورد دارای چهار آتل انعطاف‌پذیر و کش ساپورتی است. این کمریند برای کمک به کاهش حرکات ناخواسته یا بیش از حد در قسمت پایین کمر طراحی شده است و برای افرادی که از کمردرد مزمن به دلیل ورزش های مکرر و فعالیت های شغلی سخت رنج می برنند ایده آل است. مواد بادوام، قابل تنفس، انعطاف‌پذیر با قابلیت گرمایش درمانی به گرم شدن عضلات سفت، دردناک، خسته و آرتروز مفاصل کمک می کند. بستن کش های ساپورتی، فشار قابل تنظیم و محافظت و راحتی فراخور کمر شما را تضمین میکند.

موارد استفاده:

- اسپوندیلوز
- کمر درد
- اسپوندیلولیستزیس
- کشیدگی عضلانی / رگ به رگ شدن
- فتق دیسک بین مهره ای

ویژگی ها:

- استفاده از مواد اولیه تنفسی برای پوشش راحت.
- چهار آتل انعطاف پذیر پشتی، ستون فقرات را ساپورت نموده و امکان خمش و حرکت محدود را فراهم میکند.

Spine Lumbar

Sacro Lumbar Belt w/Power Strap (Free Size)


Four Splints
Code: 52041(27cm)
Code: 52051(30cm)



- بندهای کشی ساپورتی به حمایت و ایجاد فشار بیشتر کمک می کنند.
- ارتفاع پشتی کمریند در دو مدل ۲۷ و ۳۰ سانتی متر عرضه می گردد.
- ارتفاع کمریند در قسمت جلویی (روی شکم) با هدف راحتی بیمار کوتاهتر و آناتومیک شده است.
- محصول تک سایز است (یک سایز برای اکثر افراد مناسب است)

مواد سازنده:
الاستیک، نایلون، پلی استر، پلی اتیلن، فوم، EVA

جدول سایز بندی:
دور کمر و شکم خود را اندازه بگیرید.

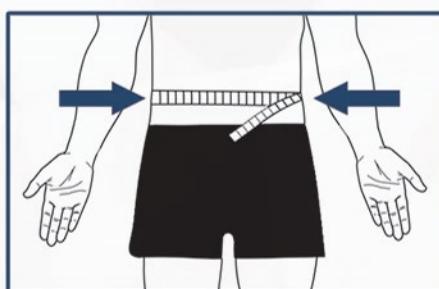

F

70-120 cm (27.56-47.24")

نام محصول:

کمریند طبی الاستیک تنفسی ۳۰ / ۲۷ سانتی متر با کش ساپورتی

مشخصات:

کمریند طبی الاستیک تنفسی با کش ساپورتی کیورد دارای چهار آتل انعطاف‌پذیر و کش ساپورتی است. این کمریند برای کمک به کاهش حرکات ناخواسته یا بیش از حد در قسمت پایین کمر طراحی شده است و برای افرادی که از کمردرد مزمن به دلیل ورزش های مکرر و فعالیت های شغلی سخت رنج می برنند ایده آل است. مواد بادوام، قابل تنفس، انعطاف‌پذیر با قابلیت گرمایش درمانی به گرم شدن عضلات سفت، دردناک، خسته و آرتروز مفاصل کمک می کند. بستن کش های ساپورتی، فشار قابل تنظیم و محافظت و راحتی فراخور کمر شما را تضمین میکند.

موارد استفاده:

- اسپوندیلوز
- کمر درد
- اسپوندیلویستزیس
- کشیدگی عضلانی / رگ به رگ شدن
- فتق دیسک بین مهره ای

ویژگی ها:

- استفاده از مواد اولیه تنفسی برای پوشش راحت.
- چهار آتل انعطاف پذیر پشتی، ستون فقرات را ساپورت نموده و امکان خمس و حرکت محدود را فراهم میکند.
- بندهای کشی ساپورتی به حمایت و ایجاد فشار بیشتر کمک می کنند.

Spine Lumbar



Sacro Lumbar Belt

w/Power Straps
(Free size & Econ.)


Four Splints
Code: 520412(27cm)
Code: 520512(30cm)

- بند کشی ساپورتی به حمایت و ایجاد فشار بیشتر کمک می کند.
- ارتفاع پشتی کمریند در دو مدل ۲۷ و ۳۰ سانتی متر عرضه می گردد.
- ارتفاع کمریند در قسمت جلویی (روی شکم) با هدف راحتی بیمار کوتاهتر و آناتومیک شده است.
- محصول تک سایز است (یک سایز برای اکثر افراد مناسب است)

مواد سازنده:
الاستیک، نایلون، پلی استر، پلی اتیلن، فوم، EVA

جدول سایز بندی:

دور کمر و شکم خود را اندازه بگیرید.

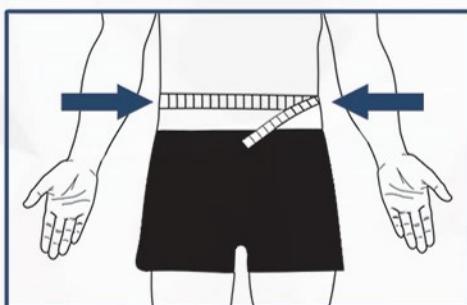

F

70-120 cm (27.56-47.24")

نام محصول:

کمریند طبی الاستیک ۳۰ / ۲۷ سانتی متر با کش ساپورتی

مشخصات:

کمریند طبی الاستیک با کش ساپورتی کیورد دارای چهار آتل انعطاف پذیر و کش ساپورتی است. این کمریند برای کمک به کاهش حرکات ناخواسته یا بیش از حد در قسمت پایین کمر طراحی شده است و برای افرادی که از کمردرد مزمن به دلیل ورزش های مکرر و فعالیت های شغلی سخت رنج می برنند ایده آل است. مواد بادوام، انعطاف پذیر با قابلیت گرم ادیمانی به گرم شدن عضلات سفت، دردناک، خسته و آرتروز مفاصل کمک می کند. بستن کش ساپورتی، فشار قابل تنظیم و محافظت و راحتی فراخور کمر شما را تضمین میکند.


موارد استفاده:

- اسپوندیلوز
- کمر درد
- اسپوندیلولیستزیس
- کشیدگی عضلانی / رگ به رگ شدن
- فتق دیسک بین مهره ای

ویژگی ها:

- چهار آتل انعطاف پذیر پشتی، ستون فقرات را ساپورت نموده و امکان خمش و حرکت محدود را فراهم میکند.


Spine Lumbar

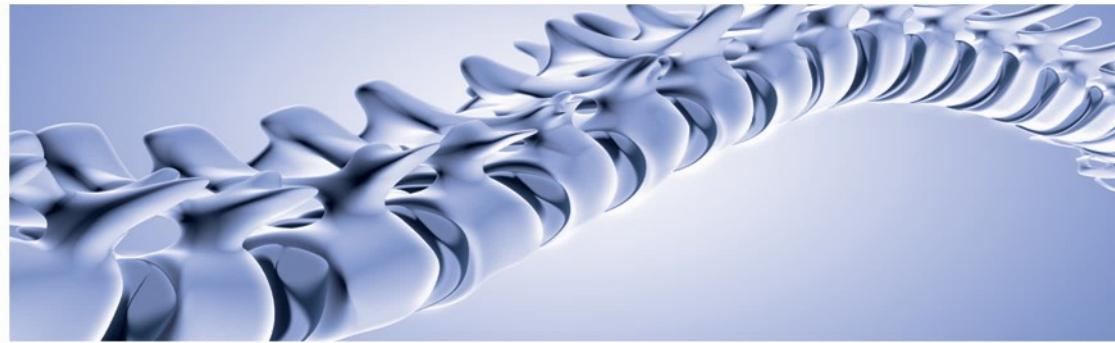

General LSO Flex

w/1:6 Pulley System
Compression


Corset offers
6:1 compression
and control
from L1 to S1.
Code: 5301

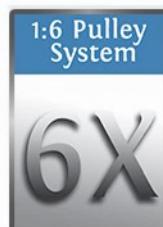

- فقط توسط یک دستگیره، امکان تنظیم آسان و سریع را فراهم می کند و مناسب برای بیماران مبتلا به آرتربیت میباشد.

- طراحی با مقیاس دقیق، حمایت و کنترل قابل تنظیم.
- ساختاری قابل تنفس، قابل شستشو و بدون فلز
- مناسب برای تصویربرداری پزشکی

مواد سازنده:
نایلون، پلی استر، پلی اتیلن، پلی استال، پی وی سی
جدول سایز بندی:
دور کمر خود را اندازه بگیرید و سایز مناسب را انتخاب کنید.

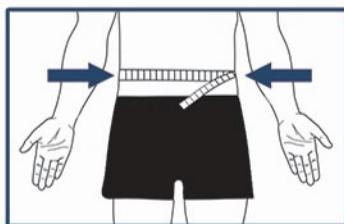

S	70-80 cm (27.56-31.50")	2XL	110-120 cm (43.31-47.24")
M	80-90 cm (31.50-35.43")	3XL	120-130 cm (47.24-51.18")
L	90-100 cm (39.43-39.37")	4XL	130-140 cm (51.18-55.12")
XL	100-110 cm (39.37-43.31")	5XL	140-150cm (55.12-59.06")

نام محصول:
کمربند جنرال لومبوسکرال با فشار قابل تنظیم قرقره ای ۱:۶

مشخصات:
کمربند جنرال لومبوسکرال ساپورت با فشار قابل تنظیم قرقره ای ۱ به ۶ کیورد به نحوی طراحی شده است تا در عین حال که راحتی بیمار را در الوبت دارد یک کمربند طبی ساپورتیو بوده و دارای قابلیت سیستم مکانیکی ایجاد فشار ۱ به ۶ برابر میباشد. این قابلیت تنها باسیله کشیدن یک دستگیره عمل می کند. یک کشش آسان و مطمئن با ایجاد فشار در قسمت شکمی بدن بیمار منجر به شکل دهنده نهایتا باعث فقرات بیمار در حالت آناتومیک خود شده و نهایتا باعث کاهش بار و یا فشار دیسک بین مهره ای میگردد. استرپ های منحصر به فرد بکار رفته در این محصول از استرپ های بکار رفته در مدل های قدیمی این بریسها بسیار محکم تر میباشد و این نکته باعث میشود که این محصول برای استفاده در یک دوره طولانی بسیار پاددام تر باشد این محصول یک ارتز با مکانیزم پیشرفتہ مکانیکی میباشد.


موارد استفاده:

- درد و رگ به رگ شدن و کشیدگی در ناحیه کمر
- اسپوندیلوز و اسپوندیلویستزیس
- تنگی کانال نخاعی

ویژگی ها:

- سیستم قرقره ای مکانیکی پیشرفتہ ۱:۶ ایجاد فشار و محدودیت حرکتی مهره های ستون فقرات را فراهم می کند.

Spine Lumbar

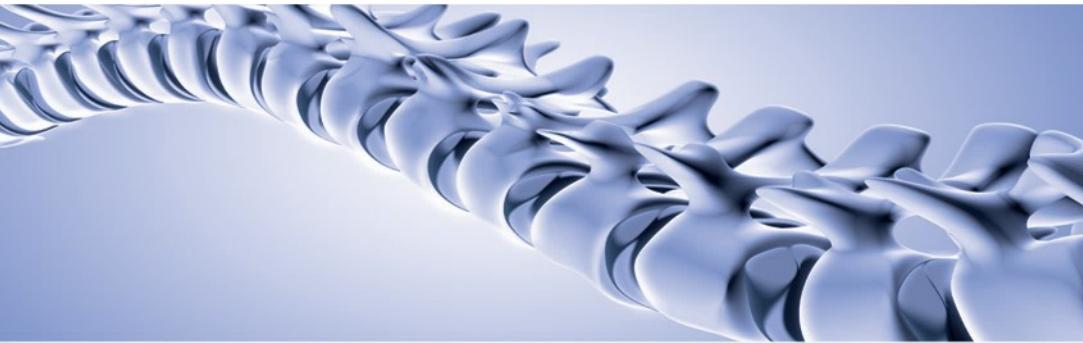

Pro LSO Flex

w/1:6 Pulley System
Compression 23/30cm

Corset offers 6:1 compression and control from L1 to S1.
Code: 5302

نام محصول:

کمربند پروفشنال لومبوساکرال ۲۳/۳۰ سانت با فشار قابل تنظیم
قرقره ای ۱۶

مشخصات:

کمربند پروفشنال لومبوساکرال ساپورت سخت با فشار قابل تنظیم قرقره ای ۱ به ۶ به نحوی طراحی شده است تا در عین حال که راحتی بیمار را در الیت دارد طبی ساپورتیو بوده و دارای قابلیت سیستم مکانیکی ایجاد فشار ۱ به ۶ برابر میباشد. این قابلیت بوسیله کشیدن یک دستگیره عمل می کند. یک کشش آسان و مطمئن با ایجاد فشار در قسمت شکمی بدن بیمار منجر به شکل دهی ستون فقرات بیمار در حالت آناتومیک خود شده و نهایتا باعث کاهش بار و یا فشار دیسک بین مهره ای میگردد. استرپ های منحصر به فرد بکار رفته در این محصول از استرپ های بکار رفته در مدل های قدیمی این کمربند ها بسیار محکم تر میباشد و این باعث میشود که این محصول برای استفاده در یک دوره طولانی بسیار باددام تر باشد. این محصول یک ارتز با مکانیزم پیشرفتی مدولار میباشد و همانطوریکه بیمار به مرور پس از استفاده از این محصول درمان میشود با تجویز پژشک میتواند میزان کنترل و حمایت و ایجاد ثبات توسط این ارتز را با جداسازی پد پشتی کاهش دهد.

موارد استفاده:

- درد و رگ به رگ شدن و کشیدگی در ناحیه کمر
- جابجایی دیسک کمر، فقط دیسک، تنگی کانال نخاعی
- فیوژن بعد از عمل، لامینکتومی، دیسککتومی
- اسپوندیلوز و اسپوندیلویستزیس


- سیستم قرقه ای مکانیکی پیشرفته ۱:۶ ایجاد فشار و محدودیت حرکتی مهره های ستون فقرات را فراهم می کند و ایجاد فشار داخل شکمی را با حداقل تلاش فراهم می کند.
- فقط توسط یک دستگیره، امکان تنظیم آسان و سریع با یک دست را فراهم میکند.
- ساختاری قابل تنفس، قابل شستشو و بدون فلز.
- دارای پنل پشتی قابل جداسازی و قابل شستشو در دو ارتفاع: ۲۳ سانتی متر (۹,۰۶ اینچ)، ۳۰ سانتی متر (۱۱,۸۱ اینچ) و مناسب برای تصویربرداری پزشکی

مواد سازنده:

نایلون، پلی استر، پلی اتیلن، پلی استال، پلی وی سی


جدول سایز بندی:

دور کمر خود را اندازه بگیرید و سایز مناسب را انتخاب کنید

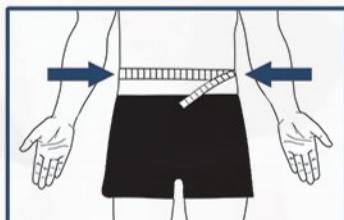

S	70-80 cm (27.56-31.50")	2XL	110-120 cm (43.31-47.24")
M	80-90 cm (31.50-35.43")	3XL	120-130 cm (47.24-51.18")
L	90-100 cm (39.37-39.37")	4XL	130-140 cm (51.18-55.12")
XL	100-110 cm (39.37-43.31")	5XL	140-150cm (55.12-59.06")

Spine Lumbar

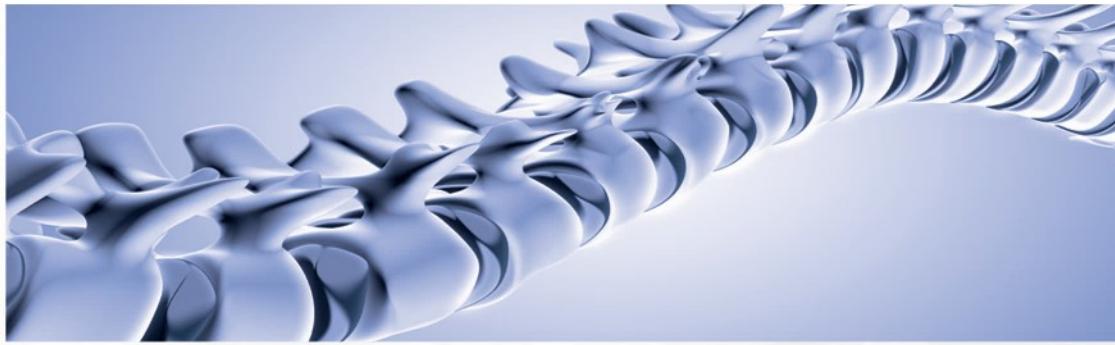

**Expert
LSO Flex**
w/1:6 Pulley System
Compression 23/30cm

Corset offers 6:1 compression and control from L1 to S1
Code: 5303



حرکتی مهره های ستون فقرات را فراهم می کند.


- فقط توسط یک دستگیره، تنظیم آسان و سریع این کمربند امکانپذیر است.
- این محصول با دستگاههای تصویربرداری پزشکی سازگار است.
- پنل پشتی قابل جداسازی و قابل شستشو در دو ارتفاع: ۲۳cm (۹,۰۶ اینچ)، ۳۰cm (۱۱,۸۱ اینچ).
- پنهانهای خلفی فرم پذیر و قابل شستشو علاوه بر ایجاد محدودیت حرکتی در طرفین از ایجاد فشار نقطعه ای در پهلوها جلوگیری میکند.
- پنل شکمی بیرونی پددار به این مدل اضافه شده است.

مواد سازنده:

نایلون، پلی استر، پلی اتیلن، پلی استال، پلی پروپیلن، بیویسی

جدول سایز بندی:

دور کمر خود را اندازه بگیرید و سایز مناسب را انتخاب کنید.

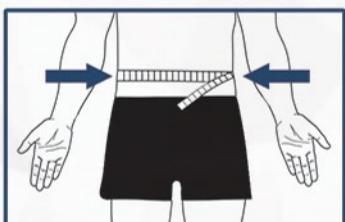

S	70-80 cm (27.56-31.50")	2XL	110-120 cm (43.31-47.24")
M	80-90 cm (31.50-35.43")	3XL	120-130 cm (47.24-51.18")
L	90-100 cm (39.43-39.37")	4XL	130-140 cm (51.18-55.12")
XL	100-110 cm (39.37-43.31")	5XL	140-150cm (55.12-59.06")

نام محصول:

کمربند اکسپرت لومبوساکرال ۲۳/۳۰ سانت با فشار قابل تنظیم
قرقره ای ۱:۶

مشخصات:

این محصول به نحوی طراحی شده است تا در عین حال که راحتی بیمار را در الیت دارد یک کمربند طبی ساپورتیو بوده و دارای قابلیت سیستم مکانیکی ایجاد فشار ۱ به ۶ میباشد. این قابلیت تنها بوسیله کشیدن یک دستگیره عمل می کند. یک کشش آسان و مطمئن با ایجاد فشار در قسمت شکمی بیمار منجر به شکل دهنده ستون فقرات بیمار در حالت آناتومیک خود شده و نهایتاً باعث کاهش بار و یا فشار دیسک بین مهره ای میگردد. استرپ های بکار رفته در این کمربندها بسیار محکم تر میباشد و این باعث قدیمی که این محصول برای استفاده در یک دوره طولانی بسیار بادام تر باشد. این محصول یک ارتز با مکانیزم پیشرفتی مدولار میباشد و همانطوریکه بیمار به مرور پس از استفاده از این محصول درمان میشود با تجویز پزشک میتواند میزان کنترل و حمایت و ایجاد ثبات توسط این ارتز را با جداسازی پدهای طرفین و پد پشتی کاهش دهد.

موارد استفاده:

- درد و رگ به رگ شدن و کشیدگی در ناحیه کمر
- جابجایی دیسک کمر، فتق دیسک، تنگی کانال نخاعی
- فیوژن بعد از عمل، لامینکتومی، دیسککتومی
- اسپوندیلوز و اسپوندیلویستزیس

ویژگی ها:

- سیستم قرقره ای مکانیکی پیشرفته ۱:۶ ایجاد فشار و محدودیت

Spine Lumbar



1:6 Pulley System

6X

Expert Rigid
LSO Brace
w/1:6 Pulley System
Compression

Corset offers 6:1
compression and
control from T9 to S1
Code: 5304

- فیوژن بعد از عمل، لامینکتومی، دیسککتومی.
- درمان قبل و بعد از جراحی.

ویژگی ها:


- این محصول با دستگاههای تصویربرداری پزشکی سازگار است.
- پنهانی پشتی، خلفی و شکمی، پد دار بوده و قابل جداسازی و شستشو میباشد و علاوه بر ایجاد محدودیت حرکتی از ایجاد فشار نقطه ای جلوگیری میکند.
- پسل پشتی را میتوان با تجویز پزشک و جهت تناسب بهتر با هر بیمار هم زمان با حرارتی دهی به فرم دلخواه تغییر داد.

مواد سازنده:

نایلون، پلی استر، پلی استال، PVC، PP، PE

جدول سایز بندی:

دور کمر خود را اندازه بگیرید و سایز مناسب را انتخاب کنید.

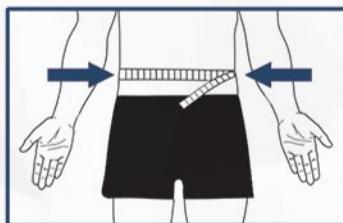

S	70-80 cm (27.56-31.50")	2XL	110-120 cm (43.31-47.24")
M	80-90 cm (31.50-35.43")	3XL	120-130 cm (47.24-51.18")
L	90-100 cm (39.43-39.37")	4XL	130-140 cm (51.18-55.12")
XL	100-110 cm (39.37-43.31")	5XL	140-150cm (55.12-59.06")

نام محصول:
بریس لومبوسکرال سخت اکسپرت با فشار قابل تنظیم قرقه ای ۱:۶


مشخصات:

بریس لومبوسکرال سخت اکسپرت با سیستم پیشرفتی قرقه ای ۱:۶ از ساختار مفصلی ستون فقرات در مهره های لگنی، کمری حمایت مینماید این کمرنند طبی حرکت در ستون فقرات را از ناحیه T9 (پشت) تا ساکروم S1 (پایین کمر) محدود مینماید و در عین حال که راحتی بیمار را در الویت دارد یک کمرنند طبی ساپورتیو بوده و دلایی قلبیت سیستم مکانیکی ایجاد فشر ۱:۶ برابر میباشد این قلبیت تنها بوسیله کشیدن یک دستگیره عمل می کند یک کشش آسان و مطمئن با ایجاد فشار در قسمت شکمی بیمار منجر به شکل دهنده ستون فقرات بیمار در حالت آناتومیک خود میشود. استرپ های بکار رفته در این محصول از محکم تر میباشد و این نکته باعث میشود که این محصول برای استفاده در یک دوره طولانی بسیار بادام تر باشد. این محصول یک ارتز با مکانیزم پیشرفتی مدولار میباشد و همانطوری که بیمار به مرور پس از استفاده از این محصول درمان میشود با تجویز پزشک میتواند میزان کنترل و حمایت و ایجاد ثبات توسط این ارتز را با جداسازی پد های طرفین و پد پشتی کاهش دهد.

موارد استفاده:


- کمر درد.
- کشیدگی ارگ به رگ شدن کمر.
- تنگی کانال نخاعی کمری.
- برآمدگی دیسک.
- اسپوندیلویستزیس.
- جابجایی دیسک و فتق دیسک

Spine Thoracic & Lumbar

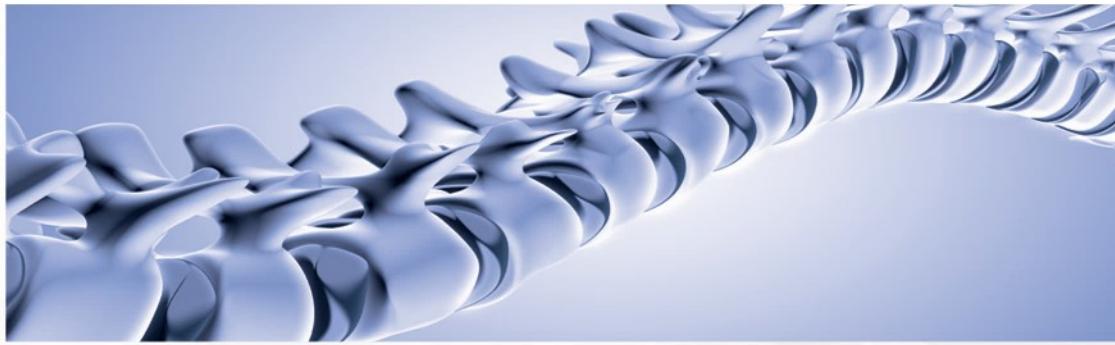

Expert Rigid TLSO Brace w/1:6 Pulley System Compression

Corset offers 6:1 compression and control from T3 to S1
Code: 5405

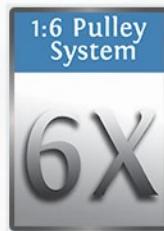

• جابجاگی دیسک و فتق دیسک

• فیوژن بعد از عمل، لامینکتومی، دیسکوتومی

• درمان قبل و بعد از جراحی

ویژگی ها:


- این محصول با دستگاههای تصویربرداری پزشکی سازگار است.
- پنهانی پشتی، خلفی و شکمی، پد دار بوده و قابل جداسازی و شستشو میباشد و علاوه بر ایجاد محدودیت حرکتی از ایجاد فشار نقطه ای جلوگیری میکند.
- پنل پشتی را میتوان با تجویز پزشک و جهت تناسب بهتر با هر بیمار همزمان با حرارتی دهی به فرم دلخواه تغییر داد.

مواد سازنده:

نایلون، پلی استر، پلی اسٹال، PVC، PP، PE

جدول سایز بندی:

دور کمر خود را اندازه بگیرید و سایز مناسب را انتخاب کنید.

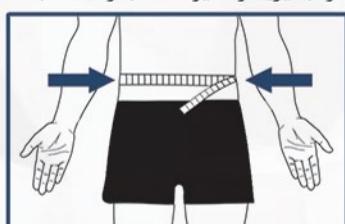

S 70-80 cm (27.56-31.50")

2XL 110-120 cm (43.31-47.24")

M 80-90 cm (31.50-35.43")

3XL 120-130 cm (47.24-51.18")

L 90-100 cm (39.43-39.37")

4XL 130-140 cm (51.18-55.12")

XL 100-110 cm (39.37-43.31")

5XL 140-150cm (55.12-59.06")

نام محصول:

بریس تراکولومبوساکرال سخت اکسپرت با فشار قابل تنظیم قرقه ای ۱:۶

مشخصات:


بریس تراکولومبوساکرال سخت اکسپرت با سیستم پیشرفتہ قرقه ای ۱:۶ از ساختار مفصلی ستون فقرات در مهره های لگنی، کمری و پشتی حمایت مینماید این کمربند طبی حرکت در ستون فقرات را ز ناحیه قفسه سینه T3 (میانه پشت) تا ساکروم S1 (پایین کمر) محدود نموده و به گردن اجازه حرکت آزادانه می دهد. این محصول را می توان به صورت یک ارتز بلند ستون فقرات که از ناحیه مهره های سینه ای تا کمری را پوشش می دهد مورد استفاده قرار داد و در عین حال که راحتی بیمار را در الوبت دارد یک کمربند طبی ساپورتوبوده و دارای قابلیت سیستم مکانیکی ایجاد فشار ۱:۶ برابر میباشد. این قابلیت تنها بوسیله کشیدن یک دستگیره عمل می کند. یک کشش آسان و مطمئن با ایجاد فشار در قسمت شکمی بیمار منجر به شکل دهی ستون فقرات بیمار در حالت آناتومیک خود میشود. استرپ های بکار رفته در این محصول از استرپ های بکار رفته در مدل های قدیمی این کمربندها بسیار محکم تر میباشد و این نکته باعث میشود که این محصول برای استفاده در یک دوره طولانی بسیار بادام تر باشد. این محصول یک ارتز با مکانیزم پیشرفتہ مدولار میباشد و همانطوری که بیمار به مرور پس از استفاده از این محصول درمان میشود با تجویز پزشک میتواند میزان کنترل و حمایت و ایجاد ثبات توسط این ارتز را با جداسازی پنهانی طرفین و پد پشتی کاهش دهد.

موارد استفاده:

• تنگی کانال نخاعی

• انحراف زیاد ستون فقرات (کایفوز)

• کشیدگی حاد در ناحیه لومبار و توراسیک کمر

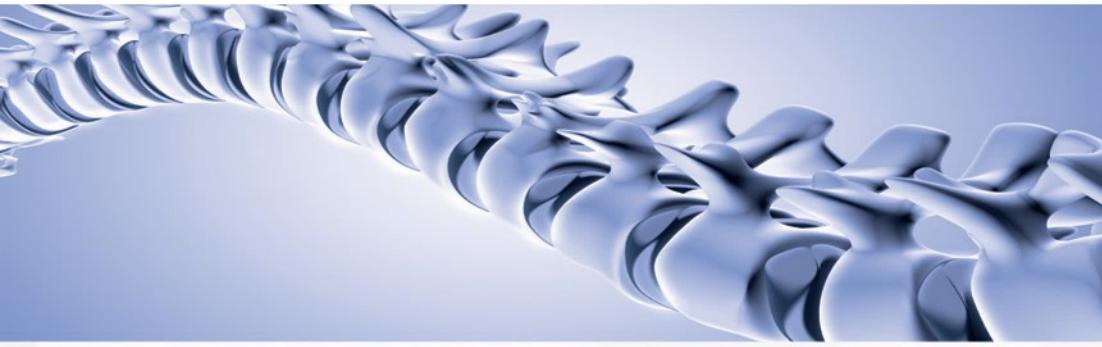

Spine Lumbar




Maternity Support

Code: 6201



- مواد سازنده:**
نایلون، پلی استر، ابر
جدول سایز بندی:
دور شکم خود را اندازه بگیرید.

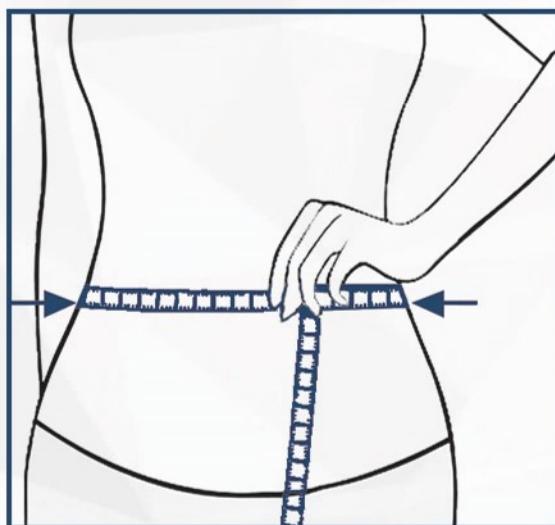

M 65-115 cm (25.60-45.27")

L 75-125 cm (29.13-33.07")

نام محصول:

کمربند حاملگی یک تکه

مشخصات:

استفاده از این محصول در موارد زیر مناسب می‌باشد:

- درد عضلاتی شکم زنان باردار.
- جنین زن باردار بیش از حد بزرگ باشد.
- یک ساپورت خارجی برای زنان باردار در زمانیکه جنین حالت غیر طبیعی داشته باشد است.
- افتادگی شکم ، احتمال ابتلاء به زایمان زودرس و سقط جنین در زنان باردار.
- نگرانی در مورد افتادگی شکم، که بهبودی بعد از تولد نوزاد را در زنان باردار تحت تاثیر قرار میدهد.
- بیماری واریس بارداری و تورم پا که بسیار برای زنان باردار خطرنگ هستند.


موارد استفاده:

- دردهای مرتبط با بارداری در عضلات کمر، ساق پا و شکم را تسکین می دهد.
- کمک به کاهش دردهای لگنی در دوران بارداری.

ویژگی ها:

- از ناحیه کمر و لگن مراقبت می کند.
- کشش رباط های عضلاتی زنان باردار را که ناشی از آویزان بودن شکم است، تسکین می دهد.
- کمک به کاهش کمردرد و حمایت از شکم در بارداری.
- در روی پوست احساس نرمی و راحتی را ایجاد میکند.
- با لیفت شکم زنان باردار به تسکین درد کمک می کند.
- قابل پوشیدن در زیر لباس روزانه

Spine Lumbar

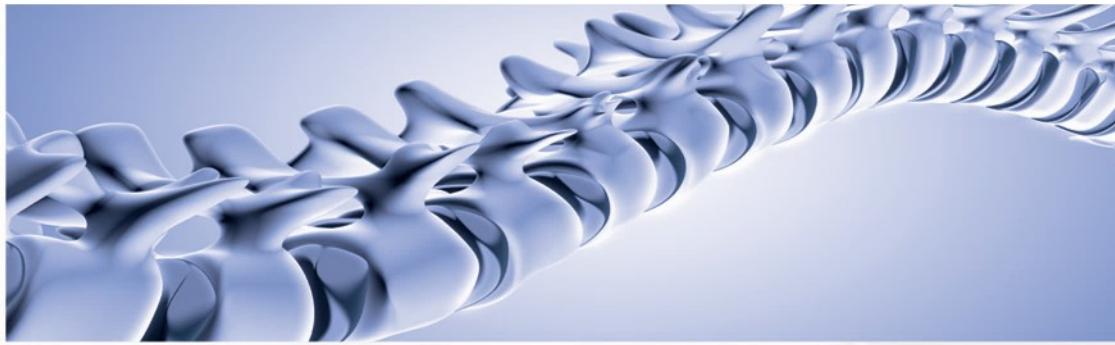

Maternity Support Belt

Code: 6202



خود نگه داشته و از لوله شدن آن جلوگیری می کند.

- حمایت ملایم با حداکثر راحتی بدون فشار نامطلوب را فراهم می کند.
- به کاهش کمردرد کمک می کند و از شکم حمایت می کند.
- ساخته شده از کش سبک و پارچه لمینت شده بادوام، که این مواد در تماس با پوست احساس نرمی را ایجاد می کنند.


مواد سازنده:

نایلون، پلی استر، ابر، پلی اتیلن

جدول سایز بندی:

دور کمر و شکم خود را اندازه بگیرید.

S	61.5-78.5cm (24.21-30.90")
M	71.5-88.5 cm (28.15-34.84")
L	81.5-98.5 cm (32.08-38.78")
XL	91.5-108.5 cm (36.02-42.71")
2XL	101.5-118.5 cm (39.96-46.65")

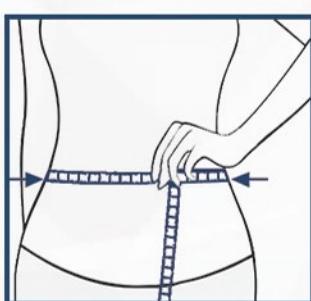

نام محصول:

کمربند حاملگی دوتکه

مشخصات:

استفاده از این محصول در موارد زیر مناسب می باشد:

- درد عضلانی شکم زنان باردار.
- افتادگی شکم، احتمال ابتلا به زایمان زودرس و سقط جنین در زنان باردار.
- جنین زن باردار بیش از حد بزرگ یا حالت غیر طبیعی داشته باشد.
- نگرانی در مورد افتادگی شکم، که بهبودی بعد از تولد نوزاد در زنان باردار را تحت تاثیر قرار میدهد.
- واریس بارداری و تورم با که بسیار برای زنان باردار خطروناک هستند

موارد استفاده:

- قبل و بعد از بارداری
- تسکین کمردرد مرتبط با بارداری
- دردهای مرتبط با بارداری در شکم و ساق پا و عضلات لگن را تسکین می دهد

ویژگی ها:

- با لیفت شکم به تسکین درد کمک می کند.
- استرپ الاستیک مورب اضافی در قسمت جلو باعث حفظ موقعیت کمربند پشتی میشود و هنگام استفاده راحت و نامحسوس است.
- دو تیکه ساخته شده، که برای سازگاری با رشد شکم در طول بارداری کاملا قابل تنظیم میباشد.
- دارای دو آتل در قسمت پشت بوده که حمایت اضافی در ناحیه کمر را ایجاد می کند و کمربند را در موقعیت



اندام فوقانی

اندام زبرین یا اندام فوقانی که در اصطلاح عامیانه به آن بالاتنه گفته می‌شود در کالبدشناسی عبارت است از هردو مجموعه چپ و راست شانه، بازو، زیر بغل، آرنج، ساعد و دست. اندام فوقانی شامل استخوان‌های:

از استخوان‌های اندام فوقانی می‌توان به ترقه (Clavicle)، کتف (Scapula)، استخوان بازو (Humerus)، زند زبرین (Radius)، زند زبرین (Ulna)، استخوان‌های مج دست (Carpal bones)، استخوان‌های کف دست، استخوان‌های انگشتان دست اشاره کرد.

استخوان‌های مج دست (Carpal bones): ناحیه مج دست از هشت قطعه استخوان، موسوم به استخوان‌های کارپال ساخته شده است. استخوان‌های مج دست که بر اساس شکلشان نامگذاری شده اند در دو ردیف بالایی و پایینی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

استخوان‌های کف دست (Metacarpal Bones): در هر دست پنج استخوان کف دستی (متاکارپال) وجود دارد. استخوان‌های کف دست به ترتیب از سمت شست به طرف انگشت کوچک شماره گذاری می‌شوند. (دست در وضعیت آناتومیک قرار دارد)

بندهای انگشتان (Phalanges): اولین انگشت (شست) دو بنده دارد، بقیه انگشتان دست هر کدام سه بنده دارند. تعداد کل استخوان‌های انگشتان هر دست چهارده قطعه است.



Shoulder Support



Arm Sling

Breathable
Fabric
Code: 7331



- زاویه آرنج قابل تنظیم.
- سگک جانبی برای تنظیم ارتفاع مناسب.
- مواد سبک و راحت.
- طراحی متناسب با بازوی راست و چپ.

مواد سازنده:


نایلون، پلی استر، پلی اتیلن

جدول سایز بندی:

طول ساعد خود را اندازه بگیرید.

با توجه به اینکه این محصول جزو کالاهای صادراتی شرکت می باشد، آنatomی افراد غیر ایرانی در طراحی و سایز بندی این محصول لحاظ گردیده است. لذا برای تطبیق سایز بندی ها برای ایرانیان عزیز ملاک، سایزبندی درج شده در این دفترچه میباشد.

XS	15.2-20.3cm (6 - 8")
S	20.3-25.4cm (8-10")
M	25.4-30.5cm (10-12")
L	30.5-35.6cm (12-14")
XL	35.6-39.4cm (14-15.5")

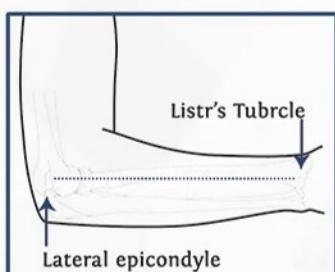

نام محصول:

آویز دست شانه ای (باترمز شست)

مشخصات:

آویز دست کیورد یک محصول راحت و سبک وزن است که برای کاهش حرکات ناخواسته یا بیش از حد در مفصل شانه و ترقوه مفید است و می تواند برای آسیب دیدگی شانه دست راست یا چپ استفاده شود. این محصول طی توانبخشی و بهبودی بعد از عمل مفید است و به جلوگیری از فشار بیش از حد رباط ها، تاندون ها و عضلات از جمله گروه روتاتور کاف کمک می کند. این محصول به تسکین درد ناشی از التهاب کیسه بورس و سندروم اینپینجمت شانه کمک کرده و با ثبیت ساعد، به نحوه صحیح قرار گیری مفصل شانه در جهت بهبودی کمک می کند.

موارد استفاده:

- صدمات عصب براکیال
- درفتگی شانه
- آسیب در عضلات روتاتور کاف
- التهاب کیسه بورس در ناحیه شانه
- درد سندروم اینپینجمت (تحت فشار قرار گرفتن ناخواسته بافت نرم و عصب بر اثر بافت سخت)
- شکستگی بازو
- محافظت بعد از عمل جراحی
- ترمز شت داخل بدن آویز دست، از خستگی دست شما جلوگیری می کند.
- بندهای شانه ای پ دار برای راحتی بیمار.

Upper Extremity



Ultra Arm Sling

Breathable Fabric
Code: 7302



- بند شانه ای قابل تنظیم با پد شانه ای، امکان استفاده راحت و قابلیت تنظیم را به کاربر می دهد.
- تولید شده با مواد سبک وزن راحت و قابل تنفس.
- طراحی یونیورسال مناسب با بازو راست یا چپ.
- استرپ کمری موجب ثبیت بهتر شانه و بازو در راستای بدن میشود.

مواد سازنده:


نایلون، پلی استر، پلی اتیلن

جدول سایز بندی:

طول ساعد خود را اندازه بگیرید.

با توجه به اینکه این محصول جزو کالاهای صادراتی شرکت می باشد، آنatomی افراد غیر ایرانی در طراحی و سایز بندی این محصول لحاظ گردیده است. لذا برای تطبیق سایز بندی ها برای ایرانیان عزیز ملاک، سایز بندی درج شده در این دفترچه میباشد.

XS	15.2-20.3cm (6 - 8")
S	20.3-25.4cm (8-10")
M	25.4-30.5cm (10-12")
L	30.5-35.6cm (12-14")
XL	35.6-39.4cm (14-15.5")

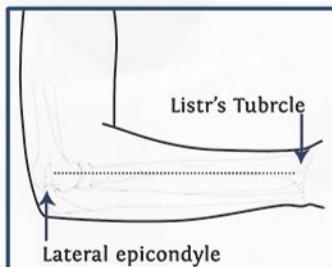

نام محصول:

ثابت کننده شانه و بازو (با استرپ کمری ثابت کننده)

مشخصات:

ثابت کننده شانه و بازو با استرپ کمری کیورد یک حمایت کننده راحت و سبک می باشد که از پارچه قابل تنفس ساخته شده است و می توان از آن برای آسیب های بازو شانه راست یا چپ استفاده کرد. این محصول با ثبیت شانه و بازو و ساعد در مقابل بدن موجب قرار گیری صحیح مفاصل شانه و بازو شده که با جلوگیری از فشار بیش از حد بر روی رباط ها، تاندون ها و عضلات از جمله گروه روتاتور کاف به تسکین درد ناشی از بورسیت و سندروم گیرافتادگی شانه و درمان کمک می کند. این محصول با بیحرکت کردن مفاصل شانه و بازو و ایجاد موقعیت مطلوب، به بهبودی مفاصل کمک میکند و طی دوره توانبخشی و بهبودی بعد از عمل مفید است.

موارد استفاده:

- صدمات شبکه براکیال(بازویی) و درفتگی شانه
- آسیب در عضلات روتاتور کاف
- التهاب بورس در ناحیه شانه
- درد سندروم اینپینجمت (تحت فشار قرار گرفتن ناخواسته بافت نرم و عصب بر اثر بافت سخت)
- شکستگی بازو و محافظت بعد از عمل جراحی ویژگی ها:

- کمک به بیحرکت کردن و ساپورت شانه و بازوی رگ به رگ شده، شکسته و پس از جراحی.
- ترمز دست داخل آویزدست از خسته شدن دست داخل آویزدست جلوگیری می کند.

Shoulder Support



Universal Shoulder Immobilizer

Adjustable Fit
Code: 7303




ویژگی ها:

- بازور اراد کنار بدن محکم می کند و تحرک شانه و بالای بازو را برای جدا شدن، درفتگی، کشیدگی و سایر آسیب ها محدود می کند.
- برچسبهای زبر و نرم این محصول قابلیت تنظیم در محل مورد نظر را فراهم می سازد.
- طراحی مناسب با بازوی راست یا چپ

مواد سازنده:
نایلون، پلی استر، پلی اتیلن، کتان

جدول سایز بندی:
دور قفسه سینه خود را مطابق شکل اندازه بگیرید.

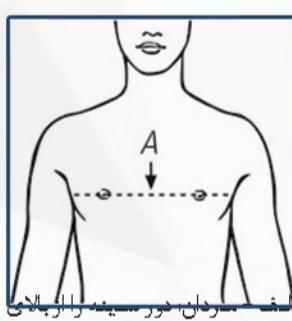


دور سینه را از بالای

سینه اندازه گیری نمایید.

S 60.96-91.44cm (24-36")

M 76.20-106.68cm (30-42")

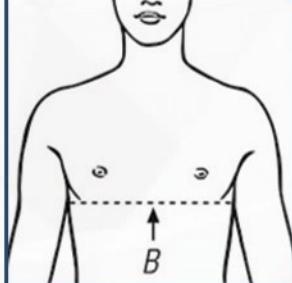

دور سینه را از زیر

سینه اندازه گیری نمایید.

L 91.44-121.92cm (36-48")

XL 106.68-137.16cm (42-54")

نام محصول:

ثابت کننده شانه و بازو با بند شانه ای (Swathe & Sling)

مشخصات:

ثبت کننده شانه و بازو کیورد وسیله ای به جهت حمایت حداقلی از شانه و بازو بوده که با ثبت ساعد و بازو در مقابل تن، تمامی حرکات ناخواسته شانه، ترقوه و بازو را محدود می کند. از این محصول می توان برای آسیب دیدگی شانه سمت راست یا چپ استفاده نمود. عملکرد این محصول ایجاد بحرکتی در مفاصل شانه است تا از این طریق شرایط بهبود مفصل و بافت نرم را فراهم آورد. این محصول برای آسیبهای روتاتور کاف، بورسیت و درد ناشی از ابداکشن مناسب است چراکه حرکت بیش از حد مفصل را کاهش می دهد. این محصول همچنین استرس را در کل مجموعه شانه از بین می برد و با ثبت ساعد در برابر بدن، هم راستای مناسب مفصل را برای بهبود تسهیل می کند و این طریق به توانبخشی فرد آسیب دیده کمک می کند.

موارد استفاده:

- صدمات شبکه براکیال (بازویی)
- درفتگی شانه
- آسیب در عضلات روتاتور کاف
- التهاب بورس در ناحیه شانه
- درد سترم اینپینجمت (تحت فشار قرار گرفتن نا خواسته بافت نرم و عصب بر اثر بافت سخت)
- شکستگی بازو
- محافظت بعد از عمل جراحی
- شکستگی قسمت اکرومیون استخوان کتف

Shoulder Support



Universal Sling & Swathe (FreeSize)

Adjustable Fit
Code: 73031



نام محصول:


آویز دست شانه ای پشت بسته (با بازو بند الحقی)

مشخصات:

آویز دست شانه ای پشت بسته (با بازو بند الحقی) کیورد و سیله ای به جهت حمایت حداکثری از شانه و بازو بوده که با تثبیت ساعد و بازو در مقابل تن، تمامی حرکات ناخواسته شانه، ترقوه و بازو را محدود میکند. از این محصول می توان برای آسیب دیدگی شانه سمت راست یا چپ استفاده نمود. عملکرد این محصول ایجاد بیحرکتی در مفاصل شانه است تا از این طریق شرایط بهبود مفصل و بافت نرم را فراهم آورد. این محصول برای آسیبهای روتاتور کاف، بورسیت و درد ناشی از ابتداشون مناسب است چراکه حرکت بیش از حد مفصل را کاهش می دهد. این محصول همچنین استرس را در کل مجموعه شانه از بین می برد و با تثبیت ساعد در برابر بدن، هم راستایی مناسب مفصل را برای بهبود تسهیل می کند و از این طریق به توانبخشی فرد آسیب دیده کمک میکند.

موارد استفاده:

- خدمات شبکه براکیال (بازویی)
- درفتگی شانه
- آسیب در عضلات روتاتور کاف
- التهاب بورس در ناحیه شانه
- درد سندروم اینپینجمت (تحت فشار قرار گرفتن ناخواسته بافت نرم و عصب بر اثر بافت سخت)
- شکستگی بازو
- محافظت بعد از عمل جراحی

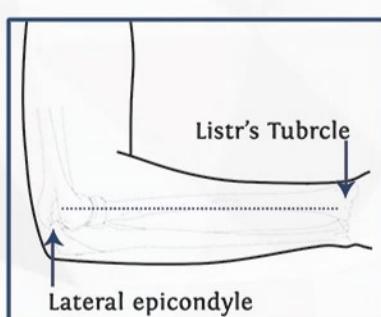

F	25.4-44.5cm (10-17.5")	M	25.4-30.5cm (10-12")
XS	15.2-20.3cm (6 - 8")	L	30.5-35.6cm (12-14")
S	20.3-25.4cm (8-10")	XL	35.6-39.4cm (14-15.5")

Shoulder Support



Shoulder Abduction Orthosis

Code: 7308



- استریپهای قابل تنظیم پوشیدن محصول را تسهیل میکنند.


- استفاده از مواد اولیه سبک وزن و راحت.

مواد سازنده:

فوم TDI، پلی استر، نایلون، پلی اتیلن

جدول سایز بندی:

طول ساعد خود را اندازه بگیرید.

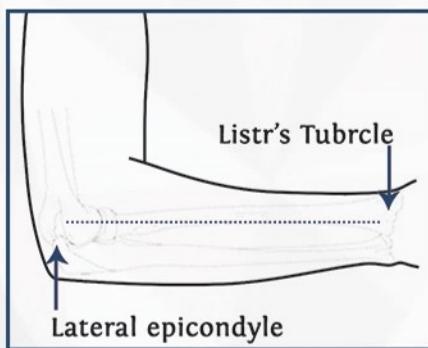

S 20.3-25.4cm (8-10")

M 25.4-30.5cm (10-12")

L 30.5-35.6cm (12-14")

نام محصول:

دور کننده شانه ۴۵-۳۰ درجه

مشخصات:

دور کننده شانه کیورد یک محصول راحت و سبک است. این محصول برای کاهش حرکات ناخواسته یا بیش از حد در مفصل شانه و ترقوه مفید است و می تواند برای آسیب دیدگی شانه راست یا چپ استفاده شود. این محصول در دوران توانبخشی و بهبودی پس از عمل مفید است. از کشیدگی بیش از حد رباطها، تاندونها و ماهیچه ها از جمله گروه روتاتور کاف جلوگیری می کند و به تسکین درد ناشی از بورسیت و بیماری های شانه کمک می کند. همچنین با ثابت ساعد، زاویه صحیح مفصل را برای بهبودی ایجاد می کند.

موارد استفاده:

- صدمات شبکه برآکیال (بازویی)
- دررفتگی شانه
- آسیب در عضلات روتاتور کاف
- التهاب بورس در ناحیه شانه
- درد سندروم اینپینجمت
- شکستگی بازو
- محافظت بعد از عمل جراحی

ویژگی ها:

- ترمز شست از خستگی دست شما جلوگیری می کند.
- بازو را حمایت و ساپورت می کند و وزن را به قسمت پشت و شانه انتقال میدهد.
- طراحی مناسب با بازوی راست و چپ.

Shoulder Support



Shoulder Support

Warmth &
Compression
Code: 7101



مواد سازنده:
نایلون، پلی استر، نئوپرن، الاستیک، کتان


نام محصول:

شانه بند قابل تنظیم نئوپرنی

جدول سایز بندی:

بالای بازوی خود را اندازه بگیرید.

با توجه به اینکه این محصول جزو کالاهای صادراتی شرکت می باشد، آناتومی افراد غیر ایرانی در طراحی و سایز بندی این محصول لحاظ گردیده است. لذا برای تعیین سایز بندی ها برای ایرانیان عزیز ملاک، سایزبندی درج شده در این دفترچه میباشد.

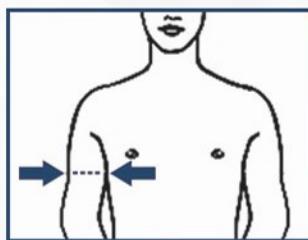

S	22-26 cm (8.66-10.24")
M	26-30 cm (10.24-11.81")
L	30-34 cm (11.81-13.39")
XL	34-38 cm (13.39-14.96")
2XL	38-42 cm (14.96-16.54")
3XL	42-46 cm (16.54-18.11")

مفصل شانه از فعال ترین و پیچیده ترین مفاصل بدن می باشد. کپسول و رباط ها به عنوان ثبات دهنده عمل می کنند، در حالیکه عضلات و تاندون ها در عملکرد فعال شانه نقش دارند. همکاری منظم مفاصل شانه، سبب ایجاد حرکات نرم شانه در تمام جهات می شود. مفصل شانه به دلیل آسیب های مستقیم در معرض بیماری های مختلفی قرار دارد. شانه بازو بند نئوپرنی کیورد، برای حمایت از مفصل شانه آسیب دیده، طراحی شده است. این محصول مفصل شانه را گرم و انعطاف پذیر نگه داشته و به شانه ورزشکار یا بیمار اجازه می دهد که به تدریج به دامنه حرکتی سابق بازگرددند.

موارد استفاده:

- بی ثباتی شانه
- تندینیت روتاتور کاف
- بورسیت

ویژگی ها:

- سبک و راحت.
- حفظ گرما جهت تسکین درد.
- مناسب برای استفاده در زیر لباس.
- طراحی متناسب با شانه راست یا چپ.

Elbow Support

Elbow Support

Targeted Relif
Code: 8101



ویژگی ها:


- سبک و راحت.
- همزمان با ساپورت، امکان حرکت کامل آرنج را طی فعالیت فراهم میسازد.
- محافظت از آرنج طی فعالیت های ورزشی.
- قابل استفاده برای هر دو دست راست و چپ.

مواد سازنده:

نایلون، پلی استر، پلی اتیلن، نئوپرن، الاستیک، کتان

جدول سایز بندی:

5 سانتی متر (۲ اینچ) زیر مفصل آرنج، دور ساعد را اندازه بگیرید.

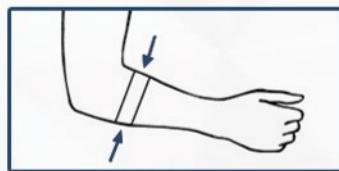

S

21-23cm (8.27-9.06")

M

23-25cm (9.06-9.84")

L

25-27cm (9.84-10.63")

XL

27-29cm (10.63-11.42")

2XL

29-31cm (11.42-12.20")

3XL

31-33cm (12.20-12.99")

نام محصول:

آرنج بند نئوپرنی

مشخصات:

مفصل آرنج شامل قسمت تحتانی استخوان بازو و قسمت فوقانی استخوان های ساعد می باشد. کپسول مفصلی و رباط های متعددی جهت حمایت از این مفصل وجود دارد. در بیشتر کارهای روزمره و در بسیاری از ورزش ها (مانند ورزش های رزمی، والیبال، هندبال)، این مفصل به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد و دارای تحرک بالایی می باشد. آرنج بند کیورد بدون ایجاد محدودیت در حرکات آرنج، در طول فعالیت هایی که نیاز به حرکات گسترده دارند مانند فعالیت های ورزشی، از آرنج محافظت می کند. این محصول با حفظ گرما به درمان آسیب های خفیف مفصل آرنج کمک می کند. علاوه بر آن، درد و تورم ناشی از آرتروز و آسیب های ورزشی را کاهش می دهد.

موارد استفاده:

- اپی کندیلیت خارجی (آرنج تنیس بازان)
- اپی کندیلیت داخلی (آرنج گلف باز)
- تسکین درد و تورم ناشی از التهاب تاندونی یا بورسیت.
- حفظ گرما به منظور بهبود گردش خون در مفصل
- کشیدگی و رگ به رگ شدن آرنج.
- حمایت از عضلات ضعیف و آرنج ضعیف
- التهاب بورس اوله کرانون (التهاب آرنج)
- جلوگیری و درمان آسیب های خفیف ورزشی

Elbow Support



Tennis/Golf Elbow Strap

Targeted Relif
Code: 8102



نام محصول:

آرنج تنیس بازان نوپرنسی

مشخصات:

مفصل آرنج شامل قسمت تحتانی استخوان بازو و قسمت فوقانی استخوان های ساعد می باشد. کپسول مفصلی و رباط های متعددی جهت حمایت از این مفصل وجود دارد. این مفصل در طول فعالیت های مختلف استفاده می شود و دارای حرک بالایی می باشد، در نتیجه در معرض آسیب قرار دارد، آرنج تنیس بازان یا التهاب کوندیل خارجی آرنج، وضعیتی است که در آن قسمت بیرونی آرنج دردناک می شود. هر فعالیتی که شامل استفاده مکرر از عضلات اکستنسور ساعد باشد، می تواند باعث ایجاد صدمه و التهاب تاندونی حاد یا مزمن در محل اتصال عضلات به گوندیل خارجی آرنج گردد. این امر منجر به ایجاد درد و حساسیت در قسمت خارجی آرنج می گردد. باند تنیس البو کیورد به گونه ای طراحی شده که با ایجاد فشار به مناطق خاصی از عضلات ساعد، باعث کاهش درد در محل اتصال عضلات تحریک شده، می شود. این آرنج بند اغلب بوسیله بازیکنان تنیس، بازیکنان گلف، کارگران صنعتی وغیره مورد استفاده قرار می گیرد. التهاب آرنج گلف بازان نیز به دلیل التهاب تاندون های متصل به کوندیل داخلی آرنج ایجاد می شود. باند تنیس البو کیورد به کاهش مشکلات آرنج تنیس بازان و گلف بازان کمک می کند.

موارد استفاده:

- اپی کندیلیت خارجی (آرنج تنیس بازان)
- اپی کندیلیت داخلی (آرنج گلف باز)
- التهاب محل اتصال تاندون های عضلات ساعد به کوندیل های داخلی و خارجی.

F

21-34.5 cm(8.27-12.99")

Wrist Support

Wrist Band

Adjustable
Code: 9102




مواد سازنده:

نئوپرن، نایلون، الاستیک، پلی اتیلن، پلی استر

جدول سایز بندی:

دور مج دست خود را اندازه بگیرید. با توجه به اینکه این محصول جزو کالاهای صادراتی می باشد، آنatomی افراد غیر ایرانی در طراحی و سایز بندی لحاظ گردیده است. لذا برای تعیین سایز بندی ها برای ایرانیان عزیز ملاک، سایز بندی درج شده در این دفترچه میباشد.

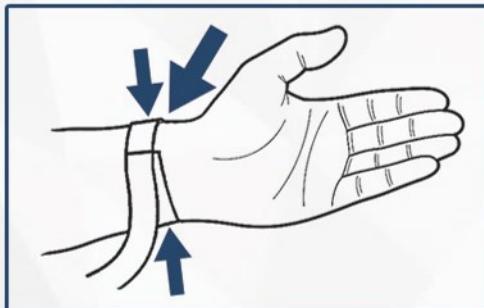

S

12-14cm (4.72-5.51")

M

14-16cm (5.51-6.29")

L

16-18cm (6.29-7.08")

XL

18-20cm (7.08-7.87")

2XL

20-22cm (7.87-8.66")

نام محصول:

مج بند قابل تنظیم نئوپرنی (با استرپ)

مشخصات:

مفصل مج دست از ۸ استخوان کوچک دست و استخوان های ساعد تشکیل شده است، که باهم مفصل مج دست را تشکیل می دهند این مفصل به دلیل تنوع وظایف و فعالیت هایی که انجام می دهد، نیاز به قدرت و تحرک کافی دارد. با این حال، مشکلات متعددی در خصوص این ناحیه وجود دارد. هدف از بستن مج بند، حمایت از مفاصل مج دست در طول حرکات تکراری سنگین و کمک کردن به مج دست ورزشکاران در طول تمرین می باشد. در طی این حرکات، مج دست می تواند تحت فشار، کشیده شود و منجر به بروز آسیب های احتمالی گردد، مج بند قابل تنظیم نئوپرنی کیورد با در بر گرفتن مج دست، گرما را حفظ کرده و درد و تورم را کاهش می دهد.

موارد استفاده:

- مج ضعیف
- بی ثباتی مج دست
- رگ به رگ شدن مج، کشیدگی
- برای ورزشکاران در طول تمرینات سنگین و مسابقات

ویژگی ها:

- با کیفیت و با دوام.
- استرپ (بند چسبی) بلند قابل تنظیم دور مج، ایجاد فشار مناسب را تضمین میکند.
- استفاده از پارچه نئوپرن با خاصیت گرما درمانی به گرم شدن عضلات و مفاصل کمک می کند.
- متناسب با مج دست چپ یا راست است.

Thumb Support



XR Thumb Brace

Lateral
Thumb Stay
Code: 9104




- بند چسبی دور مچ موجب ثبات در حین فعالیت میشود.
- درد را تسکین و مفصل کارپومتاکارپال را ثابت می کند.
- مچ دست و شست را ساپورت و کف دست را آزاد می گذارد.

مواد سازنده:

نئوپرن، نایلون، الاستیک، پلی اتیلن، پلی استر، آلومینیوم

جدول سایز بندی:

دور مچ دست خود را اندازه بگیرید. با توجه به اینکه این محصول جزو کالاهای صادراتی می باشد، آنatomی افراد غیر ایرانی در طراحی و سایز بندی لحاظ گردیده است. لذا برای تطبیق سایز بندی ها برای ایرانیان عزیز ملاک، سایز بندی درج شده در این دفترچه میباشد.

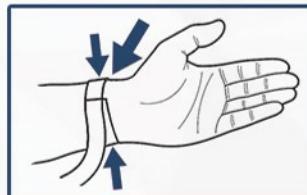

S	12-14cm (4.72-5.51")
M	14-16cm (5.51-6.29")
L	16-18cm (6.29-7.08")
XL	18-20cm (7.08-7.87")
2XL	20-22cm (7.87-8.66")
3XL	22-24cm (8.66-9.45")
4XL	24-26cm (9.45-10.24")

نام محصول:

ثبت شست نئوپرنی

مشخصات:

ثبت شست نئوپرنی کیورد دارای یک آتل آلومینیومی قابل فرم دهی بوده که بی حرکتی موضعی انگشت شست را موجب شده و امکان حرکت آزادانه سایر انگشتن را فراهم می سازد. این محصول به قرارگیری صحیح مفاصل کارپال، شست و بهبود التهاب و درد ناشی از استفاده بیش از حد از این مفاصل کمک می کند. همچنین استریپهای قابل تنظیم، حمایت و ساپورت بیشتری را نسبت به سایر مدلها در دور مچ دست و شست ایجاد می کند. استفاده از این محصول حرکات مکرر انگشت شست و کشیدگی آن را که به ویژه در حین تایپ کردن، نوشتن، استفاده از ماوس و سایر فعالیت های شغلی یا ورزشی رخ میدهد، به حداقل می رساند.

موارد استفاده:

- درد شست
- آرتروز و سندروم دکوروان
- رگ به رگ شدن / کشیدگی شست
- بی ثباتی مفصل کارپومتاکارپال

ویژگی ها:

- آتل آلومینیومی قابل فرم دهی و قابل جابجایی، باعث بیحرکتی موضعی انگشت شست در موقعیت مورد نظر میشود و می توان با تجویز پیشک و با پیشرفت بهبودی آن بیرون آورد.
- استفاده از پارچه نئوپرن با خاصیت گرما درمانی به گرم شدن عضلات و مفاصل کمک می کند.
- برای دست چپ یا راست مناسب است.

Wrist Support


Wrist Brace

Code: 9108

Stabilized Wrist Brace
(w/Palmar Stay)

Code: 9109

Extreme Stabilized
Wrist Brace
(w/Dorsal & Palmar Stays)

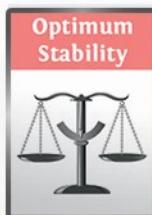

- آتل آلومینیومی بکار رفته در این محصول شکل پذیر بوده و می توان آن را با تجویز پزشک به فرم دلخواه تغییر شکل داد. در ضمن میتوان با پیشرفت درمان با تجویز پزشک آنرا از محصول بیرون آورد.
- از کشیدگی های مکرر، رگ به رگ شدن و بی ثباتی مج دست جلوگیری می کند.
- تولید شده از مواد اولیه مناسب و راحت.

مواد سازنده:

نئوپرن، نایلون، پلی استیلن، پلی استر، الاستیک، آلومینیوم
جدول سایز بندی:
دور مج دست خود را اندازه بگیرید.



S	12-14cm (4.72-5.51")
M	14-16cm (5.51-6.29")
L	16-18cm (6.29-7.08")
XL	18-20cm (7.08-7.87")
2XL	20-22cm (7.87-8.66")
3XL	22-24cm (8.66-9.45")
4XL	24-26cm (9.45-10.24")

نام محصول:

کد ۹۱۰۸: تثبیت کننده مج دست نئوپرنی

کد ۹۱۰۹: تثبیت کننده مج دست اکستریم نئوپرنی

مشخصات:

این محصول در دو مدل عرضه میگردد، کد ۹۱۰۸ دارای یک آتل آلومینیومی قابل جابجایی در قسمت کف دست میباشد و کد ۹۱۰۹ دارای دو آتل آلومینیومی قابل جابجایی در قسمت کف و پشت دست میباشد که امکان تثبیت و بیحرکتی بیشتر مج و دست را طی فرآیند گرمادرمانی فراهم میکنند. استرپ بلند قابل تنظیم در صورت نیاز میتواند فشرده سازی و حمایت بیشتر را در دور مج دست ایجاد نموده و به هم راستایی صحیح استخوان های کارپال در موقعیت آناتومیک خود کمک کند. بنابراین به کاهش التهاب در مج دست کمک می کند و در مدیریت درمان سندروم تونل کارپال مفید میباشد.

موارد استفاده:

- سندروم تونل کارپال
- التهاب تاندونی

• کشیدگی یا رگ به رگ شدن مج دست

• قابل استفاده بعد از آسیب های مج دست


• محافظت از مج دست پس از تمام دوره گج گیری

ویژگی ها:

• می توان با جابجا کردن آتلها، این مج بند را در مدل بدون چپ و راست برای دست چپ یا راست مورد استفاده قرار داد ولی در مدل چپ راست دار این امکان میسر نیست.

• در مدل اکستریم یک آتل اضافی در پشت دست قرار گرفته است تا به تثبیت بیشتر مج دست کمک کند.

Wrist Support

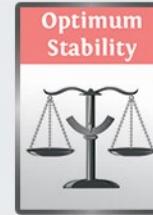

Wrist Brace w/Thumb Spica

Code: 9110
Stabilized Wrist
Brace w/Thumb Spica
(w/Palmar & Thumb
Stays)

Code: 9111
Extreme Stabilized
Wrist Brace w/Thumb
Spica (w/Dorsal, Palmar
& Thumb Stays)




- از کشیدگی های مکرر، رگ به رگ شدن و بی ثباتی مج دست جلوگیری می کند.
- استرپ بلند قابل تنظیم در صورت نیاز میتواند فشرده سازی و حمایت بیشتر را در دور مج دست ایجاد نموده و به هم راستایی صحیح استخوان های کارپال در موقعیت آناتومیک خود کمک کند.
- تولید شده از مواد اولیه مناسب و راحت.

مواد سازنده:

نئوپرن، نایلون، پلی اتیلن، پلی استر، آلومینیوم

جدول سایز بندی:

دور مج دست خود را اندازه بگیرید.

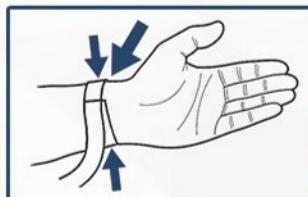

S	12-14cm (4.72-5.51")
M	14-16cm (5.51-6.29")
L	16-18cm (6.29-7.08")
XL	18-20cm (7.08-7.87")
2XL	20-22cm (7.87-8.66")
3XL	22-24cm (8.66-9.45")
4XL	24-26cm (9.45-10.24")

نام محصول:

کد ۹۱۱۰: ثبیت کننده مج و شست دست نئوپرنی
کد ۹۱۱۱: ثبیت کننده مج و شست دست اکسٹریم نئوپرنی

موارد استفاده:

- سندروم تونل کارپال
- التهاب تاندونی
- کشیدگی یا رگ به رگ شدن مج دست
- آسیبهای انگشت شست شکاربان (نارسایی در رباط اولnar)
- سندروم دکوروان
- آسیب های استخوان اسکافوئید
- بی ثباتی مفصل کارپو متاکارپال
- محافظت از مج دست پس از اتمام دوره گج گیری.

ویژگی ها:

- این محصول در دو مدل عرضه میگردد، کد ۹۱۱۰ دارای دو آتل آلومینیومی کف و انگشت شست دست میباشد و کد ۹۱۱۱ دارای سه آتل آلومینیومی کف، پشت و انگشت شست دست میباشد که به ثبیت بیشتر مج دست و شست طی فرآیند گرمادرمانی کمک میکند. به علاوه این آتلها شکل پذیر بوده و می توان آنها را با تجویز پزشک به فرم دلخواه تغییر شکل داد. در ضمن میتوان با پیشرفت درمان با تجویز پزشک آنها را از محصول بیرون آورد.
- می توان با جابجا کردن آتلها، این مج دست را در مدل بدون چپ و راست برای دست چپ یا راست مورد استفاده قرار داد ولی در مدل چپ راست دار این امکان میسر نیست.
- با حمایت و ساپورت و محدود کردن حرکات مج و شست دست و در عین حال امکان عملکرد حداکثری دست، از مج و شست ضعیف یا آسیب دیده حمایت میکند.

Finger Support



Finger Splint (Short)

Used in Hospitals
Code: 10101




مواد سازنده:

پارچه نئوپرن، نایلون، کش، پلی استر و آلومینیوم

جدول سایز بندی:

دست را صاف رو میز قرار دهید سپس طول انگشت را اندازه گیری کنید. طول انگشت برابر است با فاصله از بند اول انگشت (نزدیکترین بند به دست) تا نوک انگشت.

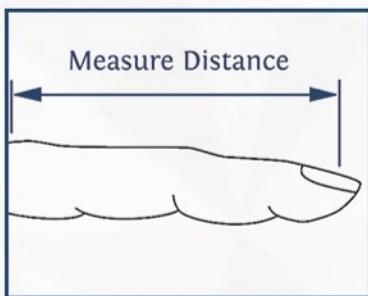

XS

4cm (1.57")

S

5cm (1.96")

M

6cm (2.36")

L

7cm (2.75")

XL

8cm (3.14")

نام محصول:

اسپلینت انگشت (کوتاه)

مشخصات:

مزیت آتل انگشت کیورد کاربرد سریع، طراحی ساده و تثبیت کافی براساس موارد تجویز ذکر شده است.

این اسپلینت به بی حرکت کردن نواحی آسیب دیده و جلوگیری از آسیب بیشتر انگشت دوم تا چهارم کمک می کند، همچنین در آسیب فالانژیال متاکارپ و مفصل بین فالانژیال انگشت دوم تا چهارم مفید است.

موارد استفاده:

- آسیب دیدگی انگشتان ۲ الی ۴
- آسیب دیدگی در مفصل متاکارپوفالنجیل و اینترفلنجیل انگشتان ۲ الی ۴
- بعد از درمان انگشتان ۲ الی ۴
- بیحرکتی بعد از عمل جراحی در انگشتان ۲ الی ۴

ویژگی ها:

- اسپلینت آلومینیومی شکل پذیر بوده و می توانند بر اساس نیاز بیمار خم شده و فرم دهی شوند.
- آتل با مواد نرم (پارچه نئوپرن) پوشانده شده است.
- استفاده از بندهای چسبی زبر و نرم پوشیدن و درآوردن محصول را آسان میسازد.

اندام تحتانی

اندام تحتانی در کالبدشناسی عبارت است از مجموعه لگن خاصره، ران، زانو، ساق، مج، قدم، کف پا و انگشتان پا.

استخوان های لگن خاصه نیز جزو اندام تحتانی هستند. شرح اسکلتی اندام تحتانی به شرح ذیل میباشد.

کمریند لگنی: استخوان های هیپ سمت راست و چپ همراه با استخوان حاجی یک حلقه کامل استخوانی موسوم به کمریند لگنی را تشکیل می دهند. کمریند لگنی اندام تحتانی را به استخوان بندی محوری متصل می کند.

لگن (Pelvis): مجموعه ی لگن از دو استخوان هیپ، یک استخوان حاجی و یک استخوان دنبالچه تشکیل شده است.

استخوان ران (Femur): استخوان ران (فمور) درازترین استخوان بدن است. این استخوان از طرف بالا با استخوان هیپ مفصل می شود و مفصل ران را تشکیل می دهد و از طرف پایین نیز با استخوان درشت نی مفصل شده و مفصل زانو را تشکیل می دهد.

استخوان کشگ (Patella): استخوان کشگ (کاسه زانو) بزرگترین استخوان سازموئید یا کنجدی (یک واژه یونانی برای چیزی شبیه تخم کنجد می باشد) بدن انسان است. این استخوان با انتهای تحتانی استخوان ران مفصل می شود.

درشت نی و نازک نی (Tibia and Fibula): ناحیه ساق پا شامل دو استخوان بلند موسوم به درشت نی و نازک نی می باشد. استخوان درشت نی نسبت به نازک نی بزرگتر و درشت تر است و در بخش داخلی این استخوان قرار دارد.

استخوان های مج پا (Tarsal bones): ناحیه مج پا از هفت قطعه استخوان، موسوم به استخوان های تارسال ساخته شده است. استخوان های مج پا شامل: استخوان قاب، استخوان پاشنه، استخوان ناوی استخوان تاسی و استخوان میخی (داخلی، میانی، خارجی) می باشند.

استخوان های کف پا (Metatarsal bones): در هر پا پنج استخوان کف پایی (متاتارسال) وجود دارد. استخوان های کف پا به ترتیب از سمت شست به طرف انگشت کوچک شماره گذاری می شوند.

بندهای انگشتان (Phalanges): انگشتان پا نیز مثل انگشتان دست از چهارده قطعه استخوان تشکیل شده اند. اولین انگشت پا نیز همانند انگشت شست دست فقط دو قطعه استخوان دارد. بقیه انگشتان پا هر کدام سه قطعه استخوان دارند که بندهای اول، دوم و سوم انگشتان نامیده می شود.



Pelvic Orthosis



T-POD 6X Pro Trauma Pelvic Orthotic Device Pro

Pulley System 6X
Used in EMS &
hospital.

General: 11301
Economic: 1130101



- جلوگیری از خونریزی داخلی لگن
- شکستگی و دررفتگی لگن

ویژگی ها:


- قابلیت استفاده در طب اورژانس و طب نظامی.
- سیستم مکانیکی قرقه ای ایجاد فشار ۶ برابری یکنواخت و کنترل شده را تهابه بوسیله کشیدن یک دستگیره میسر میسازد.
- طراحی سبک و قابل حمل با قابلیت نصب یک نفره
- ۱۰۰ درصد سازگار با دستگاههای عکس برداری پزشکی اشعه ایکس و ام آر آی.
- دارای برچسب درج تاریخچه نصب محصول به منظور بازرسی ۱۲ ساعته محل آسیب و راهنمای تنظیم فشار سیستم قرقه
- تک سایز بوده و برای اکثر افراد مناسب است.

مواد سازنده:

نایلون، پلی استر، پلی استال، PE, PP, PVC

سایز بندی:

محصول تک سایز بوده و متناسب با اکثر افراد با دور لگن ۵۶.۲۹-۱۴۳ (اینج ۵۰-۱۸.۵) سانتی متر) میباشد.

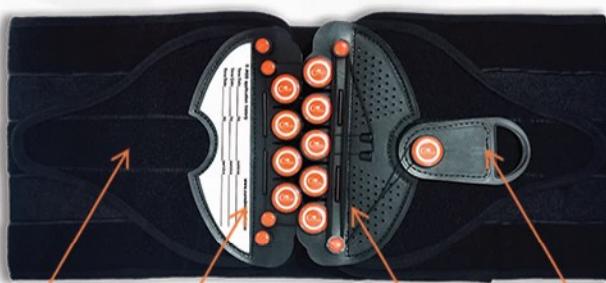

راهنمای تنظیم
فشار

برچسب درج
تاریخچه نصب
محصول

سیستم مکانیکی
پیشرفت ۱ به ۶
قرقه ای

ستگیره

P40

نام محصول:

ثبتیت کننده آنی لگن بعد از ترما (T-POD)

مشخصات:

محصول ثبتیت کننده آنی لگن بعد از ترما (T-POD) با بهره گیری از سیستم ایجاد فشار پیشرفته مکانیکی خود که ۱ کیلو ژول انرژی وارد به اهرم این محصول را به ۶ کیلو ژول انرژی در محل نصب این محصول تبدیل می کند و با ایجاد یک فشار یکنواخت و کنترل شده در ناحیه لگن ضمن جلوگیری از خونریزی داخلی در این ناحیه از حرکت بیشتر استخوان ها در محل شکستگی و آسیب بیشتر به رگ ها و شریان ها در منطقه شکستگی جلوگیری نموده و در حالیکه احتمال زنده ماندن بیمار را تا ۵۰ درصد افزایش میدهد، از آسیب بیشتر بیمار جلوگیری می نماید. می تواند ثبتیت بهتری برای شکستگی همه جانبه و ناپایدار لگن نسبت به تثبیت کننده های خارجی دیگر فراهم کند. به دلیل وجود یک سری قطعات اضافه بر روی محصول تولیدی تحت برنده کیورد شرکت سپید تن پرنیان پویش این امکان وجود دارد پس از کشیدن دستگیره و فیکساتوری لگن، نخ های بلند و اضافه دستگیره به راحتی دور پینه های نصب شده بر روی محصول پیچانده شود و این مهم از جایه جایی بیش از حد بیمار آسیب دیده در زمان نصب محصول جلوگیری کرده و مانع ایجاد مزاحمت برای بیمار و پزشک می شود. انعطاف پذیر بودن این محصول، امکان پوشش مناسب کل لگن بیمار را به خوبی فراهم می سازد.

موارد استفاده:

- به منظور ثبتیت لگن و در آسیبهای لگن
- در شرایط مشکوک به شکستگی لگن

Cured | www.curedmedical.com

Knee Support



Patella Tendon Strap

Adjustable Fit
Code: 13101




مواد سازنده:

نئوپرن، نایلون، کتان، پلی استر، فلز

جدول سایز بندی:

باند کشک کیورد تک سایز بوده و برای دور زانو از ۱۲ تا ۲۵ اینچ (۳۰ تا ۶۳ سانتی متر) مناسب می باشد لذا دور کشک زانو خود را مطابق شکل اندازه بگیرید.

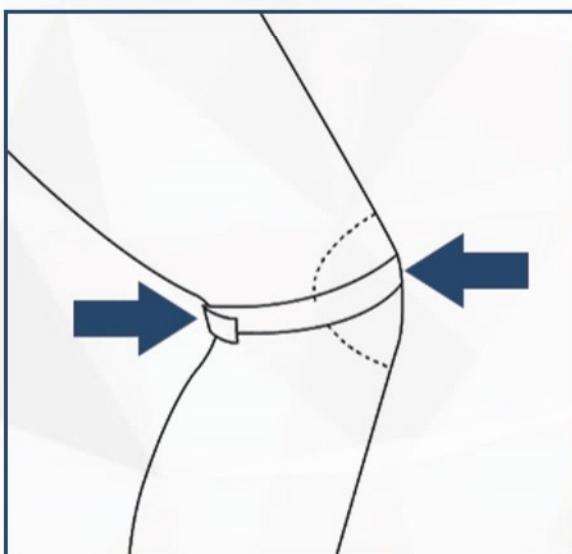

نام محصول:
باند کشک قابل تنظیم نئوپرنی
مشخصات:
باند کشک قابل تنظیم نئوپرنی کیورد دارای یک پد نئوپرنی بوده و به گونه ای طراحی شده است که مستقیماً در زیر کشک، روی تاندون کشک پوشیده شود. این باند می تواند برای کمک به تسکین درد مرتبط با هرگونه تحريك و التهاب تاندون کشک ناشی از فعالیت های شغلی یا ورزشی استفاده شود. ضمناً این محصول حرکات ناخواسته یا بیش از حد کشک را کاهش دهد. واسترپ قابل تنظیم این محصول یک حمایت مناسب و راحت را فراهم می کند.

موارد استفاده:

- تاندونیت کشک
- سندروم اسگود-شلاتر
- نایپاداری خفیف کشک

ویژگی ها:

- پیچیدن این باند دور کشک پوشیدن و درآوردن این باند را راحت و آسان می سازد.
- این محصول با نئوپرن با کیفیت تولید شده است.
- مناسب برای زانوی چپ و راست.
- پد اضافی روی کشک فشار و حمایت مازاد را در ناحیه مورد نظر فراهم می کند.
- کمک به تسکین درد زانو، حمایت و ثبیت کاسه زانو.
- محصول تک سایز است (یک سایز برای اکثر افراد مناسب است).

Knee Support


ADJ Knee Support

Adjustable Fit

Code: 13104



- پد دور کشک زانو، از کشک محافظت کرده و آنرا ثبیت می کند.
 - ساخته شده از نئوپرن نرم.
 - به سادگی قابل پوشیدن و در آوردن است.
 - قابل استفاده برای زانوی راست و چپ است.
- مواد سازنده:**
نئوپرن، نایلون، کتان، پلی استر
- جدول سایز بندی:**
در حالت یستاده، قسمت دور کشک زانو خود را اندازه بگیرید.

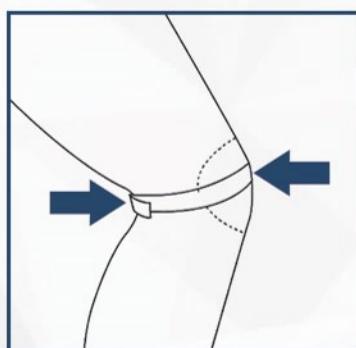

CURED SIZING CHART

S	24.75-31.6(9.74-12.44")	XL	38.5-50.6(15.15-19.92")
M	28.6-38.6(11.25-15.20")	2XL	43.45-56.6(17.1-22.28")
L	33.55-44.6(13.2-17.56")	3XL	48.4-62.6(19.05-24.65")

نام محصول:
زانو بند کشک باز قابل تنظیم نئوپرنی

مشخصات:

زانو بند کشک باز قابل تنظیم کیورد دارای یک طراحی ویژه بوده که منجر به پوشیدن راحت آن میگردد. این زانو بند با بستن دور زانو به راحتی پوشیده میشود و میتواند تناسب سایزی مورد نیاز بیماران را فراهم کند. این زانوبند با مواد سبک وزن ساخته شده و به فرد امکان فعالیت طی استفاده در کل روز را می دهد. این زانوبند که با ترکیبی مشکل از پارچه نئوپرن ساخته شده، گرمای بدن را با هدف گرما درمانی حفظ می کند تا به تسکین درد و انعطاف پذیری مفصل کمک کند. این محصول با طراحی سوراخ باز در قسمت کشک به کاهش فشار روی کاسه زانو کمک کرده و بالبه های کاملاً نرم و با استفاده از مواد اولیه با دام و راحت میتواند به بهبودی از آسیب های ناحیه زانو کمک کند. این زانوبند برای هر دو زانوی چپ و راست مناسب است.

موارد استفاده:

- آرتروز
 - زانوی ضعیف
 - بی ثباتی جزئی مفصل زانو
 - بی ثباتی جزئی کشک
 - رگ به رگ شدن و کشیدگی خفیف
- ویژگی ها:**
- باز بودن کشک در ناحیه ای زانو، فشار روی کاسه زانو را کاهش میدهد.

Knee Support




- ویژگی ها:**
- کشک باز بوده تا فشار روی کاسه زانو کاهش یابد و پد حائل نوپرزنی کاسه زانو، از کشک محافظت و آتراتشیت میکند.
 - این محصول قابل استفاده بر روی زانوی راست و چپ.
 - بندهای چسبی، حمایت کنترل شده را ایجاد میکنند.
 - چهار آتل فلزی مستحکم مارپیچی در طرفین زانو، محافظت و مراقبت لازم را فراهم می آورند.
 - پارچه نوپرزن بکار رفته در آن حرارت بدن را حفظ میکند تا مفصل زانو گرم شده و گردش خون افزایش یابد.

مواد سازنده:

نوپرزن، نایلون، الاستیک، پلی اتیلن، پلی استر، فلز

جدول سایز بندی:

در حالت ایستاده، قسمت دور کشک زانو خود را اندازه بگیرید.

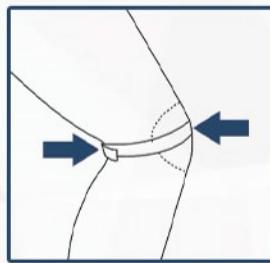

S	29-32 cm (11.41-12.59")	2XL	41-44 cm (16.14-17.32")
M	32-35 cm (12.59-13.77")	3XL	44-47 cm (17.32-18.50")
L	35-38 cm (13.77-14.96")	4XL	47-50 cm (18.50-19.68")
XL	38-41 cm (14.96-16.14")	5XL	50-53 cm (19.68-20.86")

نام محصول:
ثبتیت کننده زانو چهار فره نوپرزن
مشخصات:
ثبتیت کننده زانو چهار فره کیورد با وجود آتلهای مستحکم جانبی، برای درمان و تسکین کندرومالاسی، کشیدگی تاندون کشک و زانوهای مبتلا به آرتروز، ایده آل میباشد. با چهار آتل مارپیچی حمایت کننده در دو طرف زانو و یک پد حائل روی کاسه زانو، از کشک و مفصل زانو طی فعالیت ورزشی یا بهبودی از آسیب مراقبت می کند. با پارچه نرم نوپرزن ساخته شده است، گرمای بدن را طی فرآیند گرمادرمانی حفظ می کند تا به تسکین درد و انعطاف پذیری مفصل زانو کمک کند. با طراحی کشک باز، این زانوبند به کاهش فشار روی کاسه زانو کمک می کند. لبه های کاملا پیرایش شده محصول منجر به راحتی و دوام محصول می شوند. استرپ های قابل تنظیم این محصول فشرده سازی و حمایت کنترل شده ای زانو را فراهم می سازند. این زانوبند به گونه ای طراحی شده است که برای استفاده طی کل روز و متناسب با نیاز بیمار بوده و در عین حال دامنه کامل حرکتی را میسر می سازد. این محصول برای زانوی چپ و راست مناسب و قابل استفاده است.

موارد استفاده:

- آرتروز
- کندرومالاسی
- بی ثباتی زانو و کشک
- کشیدگی ارگ به رگ شدن زانو
- بعد از عمل

Knee Support



ADJ Knee Support (Free Size)

Adjustable Fit

Code: 131061




ویژگی ها:

- باز بودن کشک در ناحیه زانو، فشار روی کاسه زانو را کاهش میدهد.
- پد دور کشک زانو، از کشک محافظت کرده و آنرا ثابت می کند.
- ساخته شده از نئوپرن نرم.
- به سادگی قابل پوشیدن و در آوردن است.
- قابل استفاده برای زانوی راست و چپ است.
- محصول در دو سایز است (برای اکثر افراد مناسب است)

مواد سازنده:

نئوپرن، نایلون، الاستیک، پلی اتیلن، پلی استر، فلز

جدول سایز بندی:

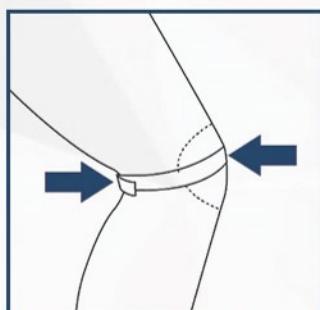

M

29-44cm (11.4-17.3")

L

44-53cm (17.3-20.86")

نام محصول:

ثبتیت کننده زانو چهار فنر قابل تنظیم نئوپرنی

مشخصات:

ثبتیت کننده زانو چهار فنر قابل تنظیم نئوپرنی کیور دارای یک طراحی ویژه بوده که باستن دور زانو به راحتی پوشیده میشود و میتواند تناسب سایزی مورد نیاز بیماران را فراهم کند. این زانو بند با وجود آنها میتواند جانبی، برای درمان و تسکین کندرومالاسی، کشیدگی تاندون کشک و زانوهای مبتلا به آرتروز، ایده آل میباشد. با چهار آتل مارپیچی حمایت کننده در دو طرف زانو و یک پد حائل روی کاسه زانو، از کشک و مفصل زانو طی فعالیت ورزشی یا بهبودی از آسیب مراقبت می کند. با پارچه نرم نئوپرن ساخته شده است، گرمای بدن را طی فرآیند گرمادرمانی حفظ می کند تا به تسکین درد و انعطاف پذیری مفصل زانو کمک کند. با طراحی کشک باز، این زانوبند به کاهش فشار روی کاسه زانو کمک می کند. استرپ های قابل تنظیم این محصول فشرده سازی و حمایت کنترل شده ای زانو را فراهم میسازند. این محصول برای زانوی چپ و راست مناسب و قابل استفاده است.

موارد استفاده:

- آرتروز
- زانوی ضعیف
- بی ثباتی جزئی مفصل زانو
- بی ثباتی جزئی کشک
- رگ به رگ شدن و کشیدگی خفیف

Knee Support



Medial & Lateral
Spiral Stays

Knee Stabilizer (Econ.)

Medial & Lateral
Spiral Stays
Code: 131062



نام محصول:


ثبتیت کننده زانو چهار فره ساده نئوپرنی

مشخصات:

ثبتیت کننده زانو چهار فره کیورد با وجود آتلهای مستحکم جانبی، برای درمان و تسکین کندرومالاسی، کشیدگی تاندون کشک و زانوهای مبتلا به آرتروز، ایده آل میباشد. با چهار آتل ماربیچی حمایت کننده در دو طرف زانو و یک پد حائل روی کاسه زانو، از کشک و مفصل زانو طی فعالیت ورزشی یا بهبودی از آسیب مراقبت می‌کند. با پارچه نرم نئوپرن ساخته شده است، گرمای بدن را طی فرآیند گرمادرمانی حفظ می‌کند تا به تسکین درد و انعطاف پذیری مفصل زانو کمک کند. با طراحی کشک باز، این زانوبند به کاهش فشار روی کاسه زانو کمک می‌کند. لبه های کاملا پیرایش شده محصول منجر به راحتی و دوام محصول می‌شوند. استرپ های قابل تنظیم این محصول فشرده سازی و حمایت کنترل شده ای زانو را می‌سازند. این زانوبند به گونه ای طراحی شده است که برای استفاده طی کل روز و متناسب با نیاز بیمار بوده و در عین حال دامنه کامل حرکتی را میسر می‌سازد. این محصول برای زانوی چپ و راست مناسب و قابل استفاده است.

موارد استفاده:

- آرتروز
- کندرومالاسی
- بی ثباتی زانو و کشک
- کشیدگی ارگ به رگ شدن زانو
- بعد از عمل

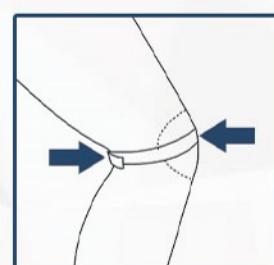

S	29-32 cm (11.41-12.59")	2XL	41-44 cm (16.14-17.32")
M	32-35 cm (12.59-13.77")	3XL	44-47 cm (17.32-18.50")
L	35-38 cm (13.77-14.96")	4XL	47-50 cm (18.50-19.68")
XL	38-41 cm (14.96-16.14")	5XL	50-53 cm (19.68-20.86")

Knee Support



Knee Immobilizer

Adjustable Fit
Used in Hospitals
General: 13301
Economic: 1330102



مواد سازنده:


نایلون، پلی استر، فلز، ابر

جدول سایز بندی:

این محصول تک سایز است و برای آناتومی اکثر زانو ها متناسب است و میتواند مناسب برای دور زانو از ۳۰ سانتی متر تا ۶۳ سانتی متر باشد.

جهت استفاده از این محصول در حالت ایستاده، قسمت دور کشک زانو خود را اندازه بگیرید.

ضمنا این محصول در دو ارتفاع موجود میباشد:
ارتفاع کوتاه ۳۸ سانتی متر = سایز متوسط (برای کودکان)
ارتفاع بلند ۵۰ سانتی متر = سایز بزرگ (برای بزرگسالان)

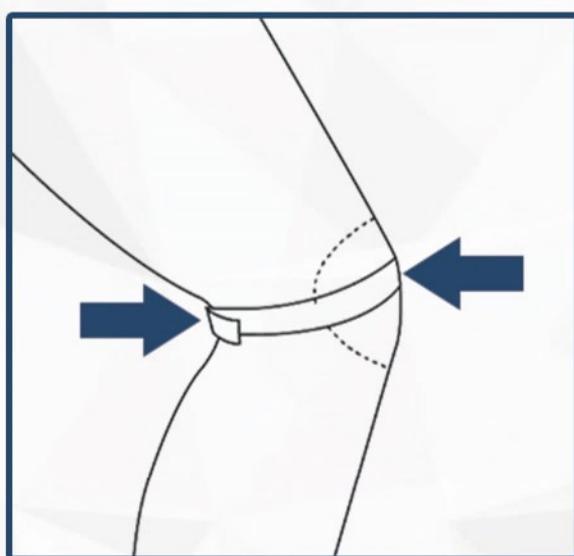

نام محصول:

بیحرکت کننده زانو با پد کشک

مشخصات:

بیحرکت کننده زانو با پد کشک کیورد با طراحی چهار تکه دارای قابلیت تنظیم و سازگاری با فرم زانوی افراد مختلف میباشد علاوه بر آن:

- استفاده از پارچه حوله ای در قسمت داخل محصول باعث راحتی مصرف محصول میشود.
- با بهره مندی از پنج آتل سخت فلزی مفصل زانو را کاملا بیحرکت نگه میدارد.
- آتل های محصول را می توان جهت راحتی در شستشو از محصول جدا کدو پس از شستشو به محصول متصل نمود.

موارد استفاده:

- قبل و بعد از عمل جراحی، بعد از سانحه، عضله و یا صدمات رباط و پس از حذف گج.
- درمانهای نیاز به مراقبت ویژه پس از دوره درمان موفق کانسروتیو خدمات رباطهای کولترال.
- شکستگی هایی که قطعات استخوان از هم جدا شده باشند و ترک خوردگی ها در محل مفصل زانو.

ویژگی ها:

- بیحرکت کردن مفصل زانو.
- چهار تکه دارای قابلیت تنظیم و سازگاری با فرم زانوی افراد مختلف.
- تک سایز بوده و برای اکثر سایزهای زانو مناسب است.
- همراه با پد کشک به منظور ایجاد بیحرکتی کامل.
- دارای اسپلینت های میانی و جانبی جدا شونده و قابل تنظیم.
- دارای سایز قابل استفاده برای کودکان.



Shin Support



Hydrotherapy Shin Support (Water_Resistance Sock)

Hydrotherapy
Code: 12101



- خصوصیت شناوری آب به تعادل بیشتر افراد کمک می کند.
- تکرار تمرين های حرکتی در آب با این محصول باعث افزایش قدرت و استقامت و بهبود انعطاف فرد می شود ضمناً ورزش در آب راحت تر از خشکی بوده و در درمان بعضی بیماری هامؤثر می باشد.
- انجام تمرينات با این محصول در آب باعث افزایش زمان عکس العمل برای افراد دچار نقصان در تعادل می شود.^{***} به علت خاصیت ویسکوزیته ای آب، حرکت در آب آهسته تر صورت می گیرد.^{***}

مواد سازنده:

نئوپرن، نایلون، الاستان، پلی استر، پلی اتیلن

جدول سایز بندی:

برای انتخاب سایز مناسب : دور قسمت اوج ساق پا را در حالی که در موقعیت ایستاده هستید انداز گیری کنید و سایز مناسب را از جدول زیر انتخاب نمایید.

S	31-34 cm (12.2-13.39")
M	34-37 cm (13.39-14.57")
L	36.5-40 cm (14.37-15.75")
XL	39.5-43 cm (15.55-16.93")
XXL	42-46 cm (16.54-18.11")



نام محصول:

ساق بند هیدروترالپی (جوراب مقاومتی آبی)

موارد استفاده:

- تقویت عضلات پا (چهار سر ران سرینی و همسترینگ) و مج پا.
- تسريع فرآیند ریکاوری ورزشکاران پس از آسیب های ورزشی در ناحیه پا
- افزایش اثر بخشی تمرينات ورزشی در آب و ایجاد استقامت در عضلات پا
- روشی ایمن جهت کاهش وزن افراد مبتلا به چاقی از طریق سوزاندن کالری بیشتر، در حالیکه احتمال آسیب دیدگی حین انجام تمرينات ورزشی را کاهش می دهد.
- کمک به افزایش سرعت بهبود در سالمندان افراد مبتلا به درد زانو و دردهای رماتیسمی
- کمک به بهبود اختلالات تعادلی
- کاهش قابل توجه طول درمان مبتلایان به دردهای ناحیه پا

ویژگی ها:

- سبک و به راحتی قابل استفاده می باشد.
- ایجاد یک فشار یکواخت و قابل کنترل بر روی عضلات پا و عدم ایجاد فشار نقطه ای و غیر قابل کنترل حین استفاده.
- ماساژ درمانی ساق پا به دلیل عبور جریان آب از بین بالهای محصول و عضلات ساق پا.
- کاهش قابل توجه احتمال آسیب دیدگی در مقایسه با محصولات مشابه تقویت کننده عضلات پا مانند وزنه ساق در هنگام استفاده از این محصول و از طریق آب درمانی فرد راحت تر می تواند در یک محیط با نیروی جاذبه کم حرکت کند و اقدام به توان بخشی عضلات خود نماید.
- افزایش دامنه حرکتی .

Ankle Support



Ankle Support w/Strap

Extra Compression
Code: 14103



ویژگی ها:

- سبک و قابل استفاده در کفش.
- طراحی قسمت باز در ناحیه انگشتان و پاشنه پا، اجازه طیف گسترده ای از حرکات را می دهد. ضمنا باز بودن قسمت پاشنه فشار کمتری بر ناحیه حساس تاندون آشیل وارد می کند و پوشیدن را راحت تر می کند.
- در صورت عدم نیاز به حمایت و ساپورت اضافی، کش لیگامانی قابل جدا شدن می باشد.
- فرهای مارپیچی انعطاف پذیر در دو طرف مج پا، مانند تاندون برای تقویت مج پا عمل می کنند.
- ساخته شده با نئوپرن، که باعث حفظ گرما و کاهش درد مفصل مج پا می شود.
- درد ناشی از کشیدگی یا گرفتگی را تسکین می دهد.
- مناسب جهت استفاده پای راست و چپ


مواد سازنده:

پارچه نئوپرن، نایلون، کش، پلی استر و فلز

جدول سایز بندی:

قسمت دور مج پا را اندازه بگیرید.

XS	16-18 cm (6.29-7.08")
S	18-20 cm (7.08-7.87")
M	20-22 cm (7.87-8.66")
L	22-24 cm (8.66-9.45")
XL	24-26 cm (9.45-10.24")
2XL	26-28 cm (10.24-11.02")

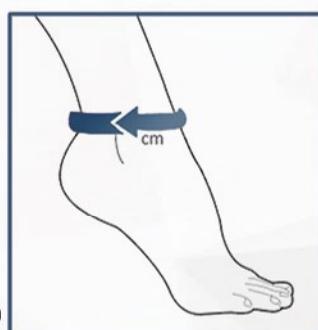

نام محصول:

قوزک بند نئوپرنی (جلو باز آتل دار با کش لیگامانی)

مشخصات:

قوزک بند نئوپرنی کیورد با کش لیگامانی به شکل 8 انگلیسی، طراحی شده است تا کمک کند به بوجود آوردن ساپورت دینامیک دور کل مج پا و شکل 8 انگلیسی کش لیگامانی آن به بوجود آوردن ساپورت اضافی و فشار متراکم در ناحیه مج پا طی ورزش و یا فعالیتهای شغلی کمک می کند. همچنین این ساپورت تا حد زیادی خم کردن کف پا و علاوه بر آن پیچ خوردن مج پا به داخل و خارج را که مربوط به آسیب های لیگامانی و بی ثباتی مج پا بوده محدود میکند. این محصول با استفاده از بهترین نوع نئوپرن وارداتی با پارچه ضد حساسیت تولید شده و علاوه بر محدود کردن حرکات و حمایت از مفصل مج پا، با افزایش درجه حرارت موضعی و افزایش متابولیسم و گردش خون روند بهبود را سرعت بخشیده و تورم، درد و خشکی نسوج را از بین می برد. این محصول برای مج پای چپ و راست و مردان و زنان مناسب است. همچنین مناسب برای درمان سرد و گرم مفاصل میباشد. این محصول برای سایز کوکان نیز عرضه میگردد.

موارد استفاده:

- صدمات ورزشی
- بیماری های مفاصل مج پا
- پیچ خوردنگی مکرر مج پا
- صدمات استخوانی پس از اتمام دوره گج گیری
- کمک به درمان کشیدگی و پیچ خوردنگی و بی ثباتی مج پا
- ضرب دیدگی و کشیدگی لیگامان ها در اثر پیچ خوردنگی شدید مج پا



Foot



Open Toe Cast Sandal


General: 15110
Economic: 151102



موارد استفاده:

- برای شکستگی های گج گرفته شده پا.
- جلوگیری از سرخوردن، ترک خوردن و یا خراب شدن گج پا.
- ویژگی ها:**
 - دارای پنجه و پاشنه باز به منظور تسهیل عبور هوا.
 - ساخته شده از زیره آجدار جهت جلوگیری از سرخوردن در زمان استفاده.
 - دارای شش ماه گارانتی
- مواد سازند:**
فوم، پلی استر، نایلون، پلی پروپیلن
- جدول سایز بندی:**
براساس سایز کفش خود از جدول زیر سایز مناسب را انتخاب نمایید.

XS	L
29-32 (EU)	38-41(EU)
S	XL
32-35 (EU)	41-44 (EU)
M	2XL
35-38 (EU)	44-47 (EU)

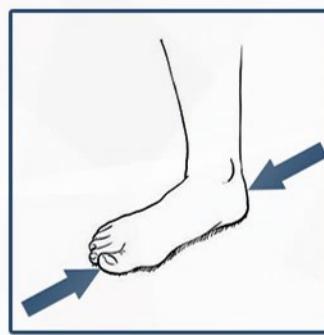

نام محصول: کفش زیر گج

در برخی موارد هنگام شکستگی پا از گج برای ثابت نگه داشتن استخوان پا و جوش خوردن مناسب استخوان استفاده می کنند. در هنگام گج گرفتگی پا، کفش فرد اندازه پای او نیست و باید از کفش زیر گج استفاده کرد. کفش زیر گج پا برای محافظت از سایش و پارگی گج و همچنین جلوگیری از کشیشدن گج پا استفاده می شود. محافظت گج می تواند برای افرادی که پای خود را برازیر شکستگی گج گرفته اند، بسیار مفید باشد. بدین ترتیب به راحتی می توان مطمئن بوده که گج خراب نمی شود زیرا اگر گج مشکل پیدا کند، شکستگی به خوبی ترمیم نخواهد شد. با توجه به اندازه های متنوعی که کفش زیر گج کیورد دارد، می توان این محصول را برای هر سنی تهیه نمود.



Sternum Support



Sternum Support

Used in
Hospitals
Code: 2201




- طراحی یک دستگیره منحصر به فرد امکان محکم شدن حداکثری این محصول را در هنگام تنفس عمیق فراهم میکند.
- پوشیدن راحت، پارچه سبک با قابلیت عبور هوا، قابلیت شستشو.

مواد سازنده:


نایلون، کتان، پلی استر، ابر، پلی اتیلن

جدول سایز بندی:

دور قفسه سینه خود را مطابق شکل اندازه بگیرید.

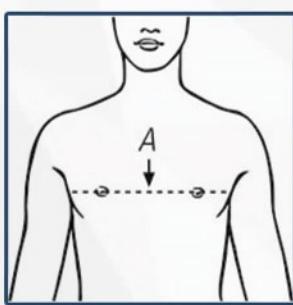

الف = مردان: دور سینه را از بالای سینه ندازه گیری نمایید.

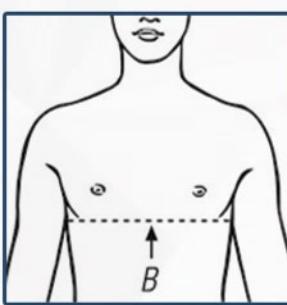

ب = زنان: دور سینه را از زیر سینه ندازه گیری نمایید.

XS	61-71 cm (24-28")	XL	102-117 cm (40-46")
S	71-81 cm (28-32")	2XL	117-132 cm (46-52")
M	81-91 cm (32-36")	3XL	132-147 cm (52-58")
L	91-102 cm (36-40")		

نام محصول:
ثبتیت کننده قفسه سینه


مشخصات:
ثبتیت قفسه سینه کیورد دور قسمت بالایی قفسه سینه بسته میشود و محافظت و بی حرکتی را برای ناحیه بالای قفسه سینه فراهم می کند. این محصول به جهت نگهداری و به حداقل رساندن حرکت بدنی قلب باز، شکستگی های دنده و جناغ ایده آل است. این محصول از کوفتگی های بافت نرم بالای قفسه سینه و التهاب مفصل استرنوکوستال مراقبت می کند. طراحی یک دستگیره منحصر به فرد امکان محکم شدن حداکثری این محصول را در هنگام تنفس عمیق فراهم میسازد.

موارد استفاده:

- آسیب های دنده
- کاهش درد قفسه سینه
- کشیدگی عضلات بین دنده ای
- پس از جراحی قلب باز

ویژگی ها:

- مراقبت مورد نیاز را درآسیب های قفسه سینه و دنده فراهم میکند و دارای طراحی آناتومیک میباشد.
- به طور خاص، برای جراحی قلب باز پس از استرنوتومی مورد استفاده قرار میگیرد و دارای دو بند شانه برای جلوگیری از لیز خوردن محصول میباشد.
- ایده آل برای حمایت و به حداقل رساندن حرکت، درشتگیهای دنده و جناغ میباشد.
- از کوفتگی های بافت نرم بالای قفسه سینه، التهاب مفصل استرنوکوستال مراقبت می کند و به خوبی زیر لباس پنهان میشود.

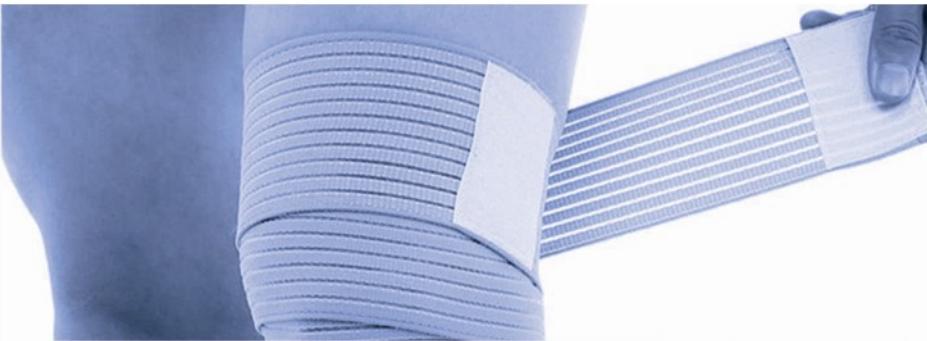

Bandage



Elastic Bandage

Medium Compression

Code: 17201 (5cm)
Code: 17202 (7.5cm)
Code: 17203 (10cm)
Code: 17204 (15cm)
Code: 17205 (20cm)



ویژگی ها:

- کاهش دهنده درد و تورم
- جلوگیری از پیشرفت التهاب
- ایجاد فشار یکنواخت بر سطح زیر باند
- پوششی در برابر آلودگی ها
- قابلیت ارتجاعی بالا
- به همراه دو گیره عرضه میگردد.

مواد سازنده:

الاستیک، پلی استر

سایزبندی :

این بانداز کشی در عرض های ۵، ۷.۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ سانتی متری ارائه میشوند و هر بانداز کشی دارای خاصیت کشسانی تا طول ۴ یارد معادل ۳.۶۵ متر میباشد.

نام محصول:

بانداز کشی فشار متوسط (۵، ۷.۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ سانتی متری)


مشخصات:

باند کشی فشار متوسط، فشاری متعادل یعنی نه کم و نه زیاد را روی پانسمان شکل داده و در زمان های مختلف در خواب یا بیداری مورد استفاده قرار میگیرد. باند کشی، نوعی بانداز با خاصیت کشسانی از جنس پارچه بوده که توسط دو گیره محل آسیب دیده را از صدمات بیشتر محافظت کرده و به عنوان پوششی در برابر آلودگی ها عمل میکند که عموماً قابل شست و شو و چند بار مصرف بوده و استفاده از آن مقرون به صرفه است. بیشترین کاربرد باندهای کشی برای کاهش و کنترل کشیدگی، کوفتگی و درد عضلانی بوده و همچنین برای پیشگیری از آسیب های احتمالی جزئی نیز موثر می باشد. توجه داشته باشید که باندهای کشی استریل نیستند و نمیتوان برای کاهش ترشحات یا التهاب زخم های باز به تنها یی از آن استفاده کرد و حتماً قبل از استفاده باید زخم را با گاز استریل پانسمان کنید.

موارد استفاده:

- آسیب های جراحی عمومی، ارتوپدی و ورزشی.
- به عنوان پانسمان فشاری بسیار مناسب میباشد.
- می تواند به جهت حمایت در آسیب های جزئی همچون رگ به رگ شدن، دررفتگی، درد مفاصل، رگ ها، گرفتگی ها، آسیب های تاندون ها و عضلات مورد استفاده قرار گیرد.
- به عنوان یک باند فشاری متوسط برای حمایت عضلانی بسیار مفید است.

N95 Respirator

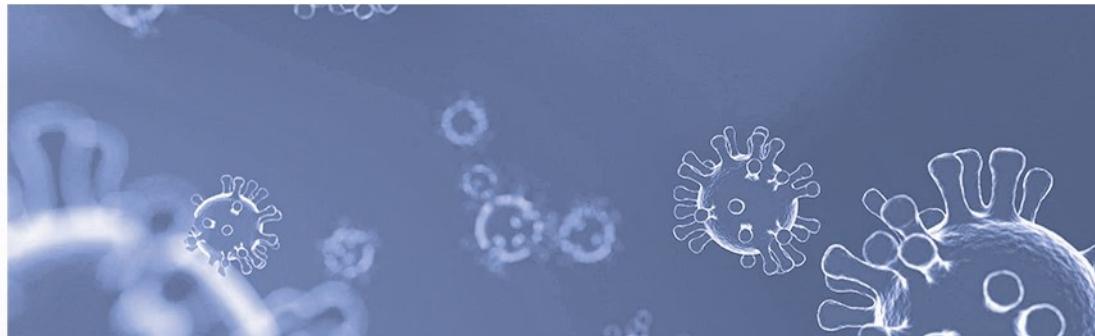

N95/99 Particulate Respirator

W/Valve

N95 Code 5L: 18104

N95 Code 6L: 18106

N99 Code: 18202



موارد استفاده:

- جلوگیری و پیشگیری از اپیدمی بیماری های واگیر دار
- کاهش افت فشار Pressure Drop ماسک
- تسهیل تنفس مبتلایان به بیماریهای تنفسی
- تسهیل تنفس جهت استفاده مجووحین شیمیایی
- جهت استفاده توسط افرادی که باید مدت زیادی از ماسک N95 استفاده نمایند.
- کارایی فیلتراسیون > ۹۵٪ استاندارد N95 آمریکا

ویژگی ها:

- دارای باتری قابل شارژ با قابلیت عملکرد ۵ الی ۱۰ ساعت
- دارای قابلیت تنظیم سرعت فن در سه حالت کند، متوسط و تند و قابلیت عملکرد ۵ الی ۱۰ ساعت متناسب با سرعت فن
- حاوی ۳۱ عدد فیلتر فن و بدنه در هر کارتون
- عرضه شده در دو نسخه ی عمومی و ورزشی

مواد سازنده:

الاستان، نایلون، پلی استر، PP، PE، قطعات الکترونیکی



نام محصول:

ماسک الکترونیکی فن دار N95

مشخصات:

ماسک الکترونیکی فن دار کیورد با بکاری از یک مازول الکترونیکی هوای خارج ماسک را بعد از عبور از فیلترهای بکار رفته در آن براساس استاندارد N95 آمریکا پالایش باکتری و ویروسی نموده هوای سالم و تمیز و پاک و خنک را به داخل ماسک هدایت نموده و موجب کاهش Differential Pressure ماسک و یا کاهش فشار وارده بر روی سیستم تنفسی شده و تجربه تنفس هوای تاز، سالم، پاک و خنک را فراهم می آورد و علاوه بر اینکه مانع ایجاد رطوبت درون ماسک می گردد، تنفس همراه با ماسک را برای مصرف کننده آسان و لذت بخش مینماید. به علت استفاده از فیلترهایی با استاندارد N95 آمریکا در این ماسک امکان فیلتراسیون ۹۵ درصد ذرات بزرگتر از ۰،۳ میکرون توسط این ماسک میسر گردیده است. این ماسک برای مقابله با بیماری های ویروسی مانند کرونا، پرسنل کادر درمان، جراحان و متخصصان و دادنپردازان، افراد دارای مشکلات تنفسی، افراد در معرض گرد و غبار دود و مواد شیمیایی می باشند، مناسب میباشد. فیلترهای N95 داخل این محصول قابل تعویض بوده و این نکته این محصول را به یک محصول چند بار مصرف و مقرون به صرفه تبدیل میکند. یک بسته از این محصول حاوی ۳۱ عدد فیلتر N95 بوده و برای مصرف بیش از یک ماه کاربر مناسب میباشد. پس از مصرف فیلترهای موجود در جعبه میتوانید فیلترهای این ماسک را ۳۰ درصد ارزانتر از یک N95 معمولی از این شرکت تهیه نمایید.



Silicone



Silicone Heel Cushion


Code: 15403



راهنمای استفاده از محصول:
ید پاشنه‌ی سیلیکونی را در قسمت پاشنه داخل کفش خود قرار دهید.
روزانه یکبار برای چند دقیقه پد را از کفش خود خارج کنید.
راهنمای شست و شو شست و شوبادست و خشک شدن با هوا به صورت روزانه پیشنهاد می‌شود.

مواد سازنده:
سیلیکون

S	35 - 37 cm (13.7-14.5")
M	38-40 cm (14.9-15.7")
L	40-43 cm (15.7-16.9")
XL	43-45 cm (16.9-17.7")

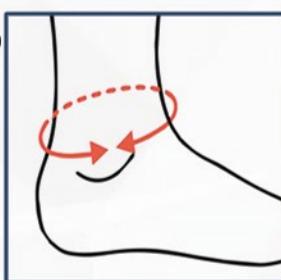

جدول سایز بندی:

نام محصول:
پد پاشنه سیلیکونی

مشخصات:
کفی طبی سیلیکونی به گونه‌ای طراحی شده که ضمن توزیع یکنواخت وزن بدن در سطح کف پا و جلوگیری از اعمال فشار نقطه‌ای، با ایجاد بستری نرم در داخل کفش از بروز التهاب و زخم در پای افراد مبتلا به بیماری قند (دیابت) جلوگیری می‌نماید. همچنین از انتقال ضربه و شوک‌های ناشی از راه رفتن و فعالیت‌های ورزشی به زانو و ستون فقرات کمری جلوگیری می‌کند

موارد استفاده:

- خار پاشنه
- درد پاشنه‌ی پا
- ضربه گیری
- جبران اختلاف قد پaha

ویژگی‌ها:

- مواد اولیه درجه یک
- ساخته شده از سیلیکون خالص گرید بهداشتی و سازگار با پوست برای ایجاد احساس خنکی و عدم ایجاد بوی بد
- طراحی دولایه قسمت آبی رنگ با نرمی بیشتر برای ایجاد راحتی بیشتر در موارد خار پاشنه و درد پاشنه‌ی پا

Silicone



Silicone Full Length Medical

Code: 15406



راهنمای استفاده از محصول:

- کفی کفش خود را خارج کرده و کفی تمام طول سیلیکونی را داخل کفش خود قرار دهید سطح برآمده کفی باید به سمت بالا باشد. به چپ و راست کفی دقت کنید.
- روزانه یکبار برای چند دقیقه کفی سیلیکونی را از کفش خود خارج کنید.
- راهنمای شست و شو شست و شو با دست و خشک شدن با هوا به صورت روزانه پیشنهاد میشود.

مواد سازنده:

سیلیکون

جدول سایزبندی:

SIZE	USA		UK	EU
	WOMEN	MEN		
SIZE	4 - 5	-	1 - 3	34-35
M	5 $\frac{1}{2}$ - 7	5 - 6	3.5 - 5	36-37
L	7 $\frac{1}{2}$ - 9	6 $\frac{1}{2}$ - 8	5.5 - 7	38-39
XL	9 $\frac{1}{2}$ - 11	8 $\frac{1}{2}$ - 10	7.5 - 9	40-41
XXL	11 $\frac{1}{2}$ - 13	10 $\frac{1}{2}$ - 12	9.5 - 11	42-43

نام محصول:

کفی تمام سیلیکونی

مشخصات:

کفی طبی سیلیکونی به گونه ای طراحی شده که ضمن توزیع یکنواخت وزن بدن در سطح کف پا و جلوگیری از عامل فشار نقطه ای، با ایجاد بسترهای نرم در داخل کفش از برخورد التهاب و زخم در پای افراد مبتلا به بیماری قند (دیابت) جلوگیری می نماید. همچنین از انتقال ضربه و شوک های ناشی از راه رفتن و فعالیت های ورزشی به زانو و ستون فقرات کمری جلوگیری می کند.

موارد استفاده:

- ساپورت قوس کف پار
- کفی تمام طول سیلیکونی
- باز توزیع کننده ای فشار روی کف پا
- ضربه گیری
- جلوگیری از خستگی پا در ایستادنهاای طولانی مدت و دویدن

ویژگی ها:

- مواد اولیه درجه یک
- ساخته شده از سیلیکون خالص گرید بهداشتی و سازگار با پوست برای ایجاد احساس خنکی و عدم ایجاد بوی بد در قسمت مورد استفاده
- قسمتهای آبی رنگ با نرمی بیشتر برای ضربه گیری موثر در قسمت سر پنجه و پاشنه پا



Silicone



Silicone Toe Separator


Code: 15401



راهنمای شست و شو:
شست و شو با دست و خشک شدن با هوا به صورت روزانه پیشنهاد میشود.

مواد سازنده:
سیلیکون

جدول سایز بندی:

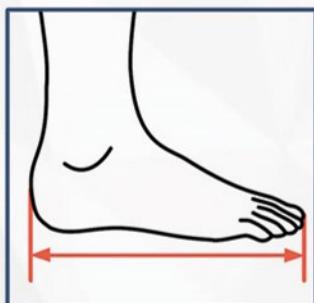

S
M
L

نام محصول:
پد بین انگشتی سیلیکونی


مشخصات:
این وسیله جهت جلوگیری از انحراف انگشتان پا طراحی گردیده است.

موارد استفاده:
• سندروم انحراف شست پا و انگشتان روی هم آمده

ویژگی ها:
• مواد اولیه درجه یک
• ساخته شده از سیلیکون خالص گرید بهداشتی و سازگار با پوست برای ایجاد احساس خنکی و عدم ایجاد بوی بد در قسمت مورد استفاده.
• فرم پد بین انگشتی سیلیکونی مطابق با آناتومی و فرم بین انگشتان پا میباشد و مصرف کننده احساس راحتی بین انگشتان خواهد داشت.

راهنمای استفاده از محصول:
• پد بین انگشتی را بین انگشت اول و دوم پای خود قرار دهید.
• روزانه یکبار برای چند دقیقه پد را از بین انگشتان بردارید.

Silicone

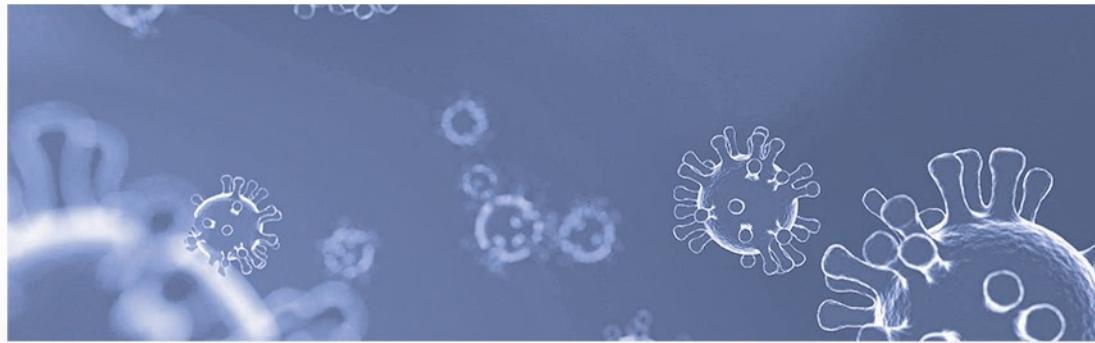

Silicone Anti Crack Heel Socks Free Size

Code: 15404



ویژگی ها:

- لایه سیلیکونی به ضخامت ۵/۲ میلیمتر
- استفاده‌ی آسان
- جوراب نخ پنبه
- رویه‌ی توری بافت
- پنجه باز

• سیلیکون خالص در قسمت پاشنه
• این محصول تک سایز میباشد و برای همه پاهای مناسب
می باشد.

مواد سازنده:

سیلیکون

نام محصول:

جوراب سیلیکونی ترک کف پا

مشخصات:

جوراب سیلیکونی ترک پا، راه کاری نوین برای بهبود خشکی زبری و ترک پا.

جوراب سیلیکونی ترک پا با حفظ رطوبت پاشنه پا مناسب استفاده جهت بهبود و جلوگیری از خشکی زبری و ترک پاشنه پا می باشد. استفاده بلند مدت از این محصول به تاخیر در پیری پوست کمک میکند و به پاهای شما زیبایی و نرمی میبخشد. هر بسته از این محصول شامل یک جفت جوراب از جنس نخ پنبه است که داخل جوراب در قسمت پاشنه پا از لایه ای از سیلیکون خالص به ضخامت ۵/۲ میلیمتر پوشیده شده است. جوراب ترک پا بافت و لایه‌ی از نخ پنبه با طراحی پنجه باز رویه‌ی توری بافت و لایه‌ی داخلی پاشنه از جنس سیلیکون خالص به پاهای اجازه‌ی تنفس میدهد و آنها را خنک نگه میدارد.

این محصول قابل شست و شو است سیلیکون استفاده شده پایدار و سازگار با پوست است و پس از شست و شو چسبنده نخواهد شد.

موارد استفاده:


- خشکی و زبری پوست پاشنه پا
- ترک پوست پاشنه پا

محصولات کودکان

ادامه محصولات کاتالوگ برای کودکان و نوجوانان میباشد.



Spine Cervical

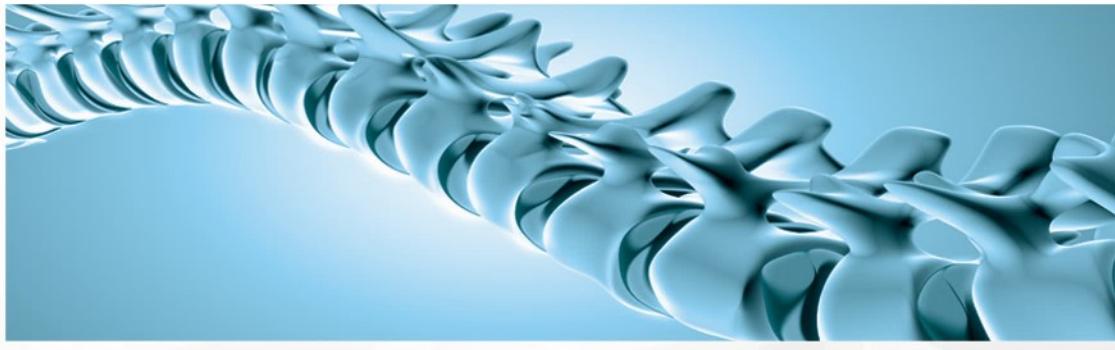

Soft Collar Cervical Collar

Comfortable Protection & Covered with two layers of fabric
Code: 12013



با روکش پنهانی، با برش منحنی شکل در قسمت قرارگیری چانه.

- در سه ارتفاع: ۴,۵ سانتی متر (۱,۷ اینچ)، ۵,۵ سانتی متر (۲,۱۶ اینچ)، ۶,۵ سانتی متر (۲,۵ اینچ) برای افراد دارای ارتفاع گردن متفاوت

مواد سازنده:

فوم TDI، استیک، پلی استر، نایلون


جدول سایز بندی:

برای اندازه گیری ارتفاع گردن، چشم ها باید مستقیم به جلو نگاه کنند، سپس فاصله بین لبه جناغ و فک پایین را با گردن در وضعیت طبیعی و آناتومیک گردن اندازه گیری کنید. برای اندازه گیری سایز محصول، دور گردن را ز روی «سیب آدم» اندازه بگیرید.
ارتفاع چانه: ۴,۵ سانتی متر (۱,۷ اینچ)، ۵,۵ سانتی متر (۲,۱۶ اینچ)، ۶,۵ سانتی متر (۲,۵ اینچ) موجود میباشد.

H = ارتفاع چانه.

C = دور گردن.

S	24 - 28 cm (9.4-11.02")
M	28 - 32 cm (11.02-12.59")
L	32 - 36 cm (12.59-14.17")
XL	36 - 40 cm (14.17-15.7")

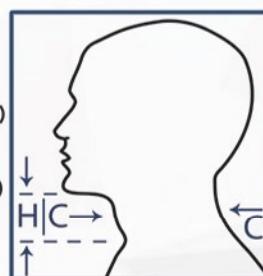

نام محصول:

کولار نرم

مشخصات:

کولار نرم کیورد به صورت ویژه ای طراحی شده است تا با ایجاد یک حمایت انعطاف پذیر با پد بالشتی در اطراف گردن باعث کنترل فشار بر مهره های گردنی گردد. این محصول در مراحل اولیه خدمات خفیف گردنی به ریکاوری و استراحت عضلات گردنی کمک میکند. این محصول کمک میکند تا حرکت گردن کنترل شده، بنابراین حرکات بیش از حد یا ناخواسته گردن کاهش یابد و عضلات و تاندون ها بیش از حد کشیده نشوند. ابر نرم بکار رفته در داخل این محصول به آن اجازه می دهد تا به راحتی در روی استخوان های ترقوه و زیر چانه شکل و حالت بگیرد.


موارد استفاده:

- اسپوندیلوزیس گردنی
- HIVD (فقق دیسک بین مهره ای)
- کوفتگی در ناحیه مهره های گردنی ستون فقرات
- کشیدگی و یارگ به رگ به رگ شدن عضلات گردن
- محافظت از گردن بعد از عمل (تشخیص پزشک)

ویژگی ها:


- ایجاد محدودیت حرکتی مهره های گردنی.
- قابل استفاده راحت در طی روز یا شب.
- از مهره های گردنی در موقعیت خنثی یا آناتومیک پشتیبانی می کند.
- ساخته شده از فوم با ضخامت ۲۵ میلی متر، پوشانده شده

Spine Thoracic

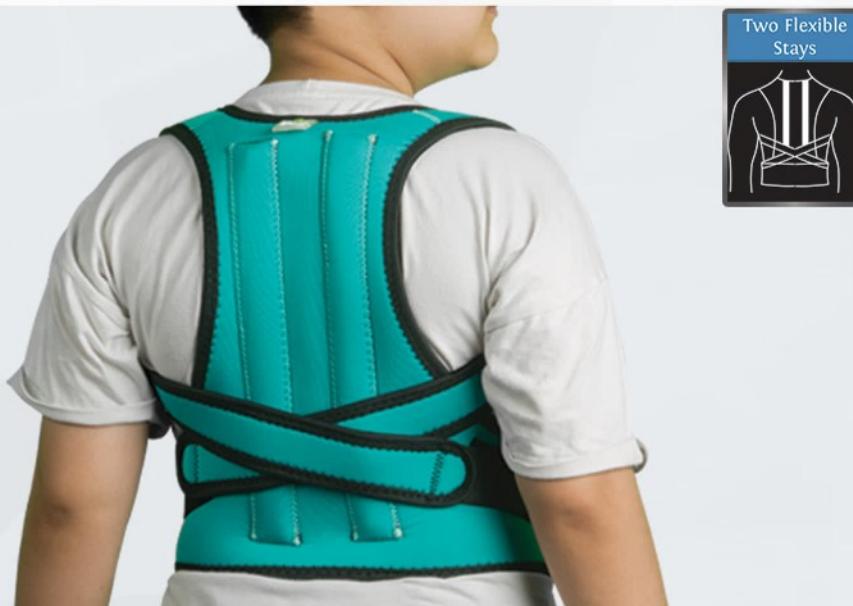

- پیکربندی مثلثی شکل این محصول به درستی فشار را به نوک شانه تقسیم می کند.
 - بند های ضربدری شکل محصول حمایت بیشتری را فراهم می کند و تنظیم محصول را آسان می سازد.
 - به علت ضخامت کم می توان آنرا زیر لباس های روزمره پوشید.
- مواد سازنده:**
نئوبرن، نایلون، کتان، پلی استر، استیل

جدول سایز بندی:
دور قفسه سینه کودک را مطابق شکل اندازه بگیرید.

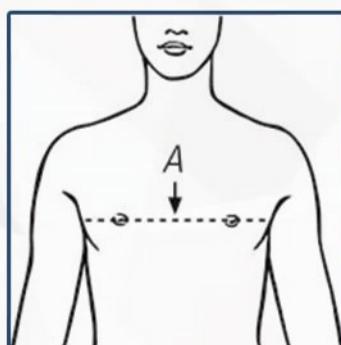

M

54 - 64 cm (21.2-25.1")

L

64 - 74 cm (25.1-29.1")

Posture Brace W/Steel Stay

Two Flexible Stays
Code: 31013

نام محصول:
کتف قوز بند آتل دار نئوبرنی
مشخصات:

کتف قوز بند کیورد برای کمک به درمان کایفوز و قوزی در مراحل اولیه ابتلا، از طریق ایجاد توازن و تعادل صحیح ستون فقرات طراحی شده است. این محصول از خم شدن بیش از حد به جلو و انحنای ستون فقرات در قسمت فوقانی (سینه ای) به جلو، جلوگیری می کند. ایستایی و در عین حال انعطاف پذیری همراه با طراحی آنatomیک این محصول، به حمایت از ماهیچه ها، رباط ها و تاندون ها کمک می کند و وضعیت بدنی را در حالت طبیعی حفظ می کند. همچنین این محصول می تواند با حمایت از بافت های نرم و توزیع یکنواخت نیرو در ناحیه ستون فقرات، به کاهش درد و اسپاسم عضلانی کمک کند. این محصول قابل تنظیم است و می توان آن را زیر لباس های روزمره پوشید.

موارد استفاده:

- افتادگی شانه ها
- خمیدگی پشت
- ضعف عضلات کتف
- نگهداری ستون فقرات در وضعیت صحیح

ویژگی ها:

- آتل های استیل انعطاف پذیر بکار رفته در این محصول به تقویت توازن قسمت فوقانی ستون فقرات و حفظ وضعیت مناسب کمک می کند و از خمیدگی جلوگیری می کند.

Shoulder Support



Arm Sling

Breathable Fabric
Code: 73313



- زاویه آرنج قابل تنظیم.
- سگک جانبی برای تنظیم ارتفاع مناسب.
- مواد سبک و راحت.
- طراحی متناسب با بازوی راست و چپ.


مواد سازنده:

نایلون، پلی استر، پلی اتیلن

جدول سایز بندی:

طول ساعد کودک را اندازه بگیرید.

با توجه به اینکه این محصول حزو کالاهای صادراتی شرکت می باشد، آنatomی افراد غیر ایرانی در طراحی و سایز بندی این محصول لحاظ گردیده است. لذا برای تطبیق سایز بندی ها برای ایرانیان عزیز ملاک، سایزبندی درج شده در این دفترچه میباشد.

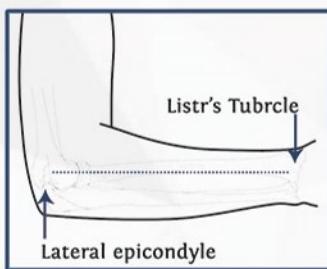

S

15-20 cm (5.91-7.87")

M

20-25 cm (7.78-9.84")

L

25-30 cm (9.84-11.81")

نام محصول:

آویز دست شانه ای (با ترمز شست)

مشخصات:

آویز دست کیورد یک محصول راحت و سبک وزن است که برای کاهش حرکات ناخواسته یا بیش از حد در مفصل شانه و ترقوه مفید است و می تواند برای آسیب دیدگی شانه دست راست یا چپ استفاده شود. این محصول طی توانبخشی و بهبودی بعد از عمل مفید است و به جلوگیری از فشار بیش از حد رباط ها، تاندون ها و عضلات از جمله گروه روتاتور کاف کمک می کند. این محصول به تسکین درد ناشی از التهاب کیسه بورس و سندروم اینپینجمت شانه کمک کرده و با تثبیت ساعد، به نحوه صحیح قرار گیری مفصل شانه در جهت بهبودی کمک می کند.

موارد استفاده:

- صدمات عصب برآکبال
- دررفتگی شانه

- آسیب در عضلات روتاتور کاف

• التهاب کیسه بورس در ناحیه شانه
درد سندروم اینپینجمت (تحت فشار قرار گرفتن نا خواسته بافت نرم و عصب بر اثر بافت سخت)

- شکستگی بازو
- محافظت بعد از عمل جراحی

ویژگی ها:

- ترمز شت داخل بدن آویز دست، از خستگی دست بیمار جلوگیری می کند.

- بندهای شانه ای پد دار برای راحتی بیمار.

Wrist Support




- از کشیدگی های مکرر، رگ به رگ شدن و بی ثباتی مج دست جلوگیری می کند.
- استرپ بلند قابل تنظیم در صورت نیاز میتواند فشرده سازی و حمایت بیشتر را در دور مج دست ایجاد نموده و به هم راستایی صحیح استخوان های کارپال در موقعیت آناتومیک خود کمک کند.
- تولید شده از مواد اولیه مناسب و راحت.

مواد سازنده:

نئوپرن، نایلون، پلی اتیلن، پلی استر، آلومینیوم

جدول سایز بندی:

دور مج دست کودک را اندازه بگیرید.

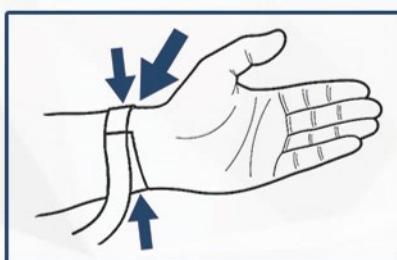

S 10 - 12 cm (3.9-4.72")

M 12 - 14 cm (4.72-5.51")

L 14 - 16 cm (5.51-6.3")

نام محصول:

کد ۹۱۱۰۳: تثبیت کننده مج و شست دست نئوپرنی

کد ۹۱۱۱۳: تثبیت کننده مج و شست دست اکسٹریم نئوپرنی

موارد استفاده:

- سندروم تونل کارپال
- التهاب تاندونی
- کشیدگی یا رگ به رگ شدن مج دست
- آسیبهای انگشت شست شکاربان (ناسایی در رباط اولنار)
- سندروم دکوروان
- آسیب های استخوان اسکافوئید
- بی ثباتی مفصل کارپو متاکارپال
- محافظت از مج دست پس از اتمام دوره گج گیری.

ویژگی ها:

- این محصول در دو مدل عرضه میگردد، کد ۹۱۱۰۳ دارای دو آتل آلومینیومی کف و انگشت شست دست میباشد و کد ۹۱۱۱۳ دارای سه آتل آلومینیومی کف، پشت و انگشت شست دست میباشد که به تثبیت بیشتر مج دست و شست طی فرآیند گرمادرمانی کمک میکند. به علاوه این آتلها شکل پذیر بوده و می توان آنها را با تجویز پزشک به فرم دلخواه تغییر شکل داد. در ضمن میتوان با پیشرفت درمان با تجویز پزشک آنها را از محصول بیرون آورد.

• می توان با جابجا کردن آتلها، این مج بند را در مدل بدون چپ و راست برای دست چپ یا راست مورد استفاده قرار داد ولی در مدل چپ راست دار این امکان میسر نیست.

- با حمایت و ساپورت و محدود کردن حرکات مج و شست دست و در عین حال امکان عملکرد حداکثری دست، از مج و شست ضعیف یا آسیب دیده حمایت میکند.

Wrist Support



Wrist Brace


Code: 91083
Stabilized Wrist Brace
(w/Palmar Stay)

Code: 91093
Extreme Stabilized
Wrist Brace
(w/Dorsal & Palmar Stays)



- آتل آلومینیومی بکار رفته در این محصول شکل پذیر بوده و می توان آن را با تجویز پزشک به فرم دلخواه تغییر شکل داد. در ضمن میتوان با پیشرفت درمان با تجویز پزشک آنرا از محصول بیرون آورد.
- از کشیدگی های مکرر، رگ به رگ شدن و بی ثباتی مج دست جلوگیری می کند.
- تولید شده از مواد اولیه مناسب و راحت.

مواد سازنده:
نئوپرن، نایلون، پلی اتیلن، پلی استر، الاستیک، آلومینیوم
جدول سایز بندی:
دور مج دست کودک را اندازه بگیرید.

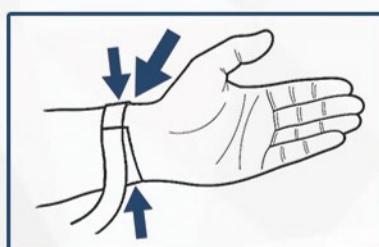

S	10 - 12 cm (3.9-4.72")
M	12 - 14 cm (4.72-5.51")
L	14 - 16 cm (5.51-6.3")

نام محصول:

کد ۹۱۰۸۳: تثبیت کننده مج دست نئوپرنی
کد ۹۱۰۹۳: تثبیت کننده مج دست اکسٹریم نئوپرنی

مشخصات:

این محصول در دو مدل عرضه میگردد، کد ۹۱۰۸۳ دارای یک آتل آلومینیومی قابل جابجایی در قسمت کف دست میباشد و کد ۹۱۰۹۳ دارای دو آتل آلومینیومی قابل جابجایی در قسمت کف و پشت دست میباشد که امکان تثبیت و بیحرکتی بیشتر مج و دست را طی فرآیند گرمادرمانی فراهم میکنند. استرپ بلند قابل تنظیم در صورت نیاز میتواند فشرده سازی و حمایت بیشتر را در دور مج دست ایجاد نموده و به هم راستایی صحیح استخوان های کارپال در موقعیت آناتومیک خود کمک کند. بنابراین به کاهش التهاب در مج دست کمک می کند و در مدیریت درمان سندروم تونل کارپال مفید میباشد.

موارد استفاده:

- سندروم تونل کارپال
- التهاب تاندونی

- کشیدگی یا رگ به رگ شدن مج دست
- قابل استفاده بعد از آسیب های مج دست
- محافظت از مج دست پس از اتمام دوره گج گیری

ویژگی ها:

- می توان با جابجا کردن آتلها، این مج بند را در مدل بدون چپ و راست برای دست چپ یا راست مورد استفاده قرار داد ولی در مدل چپ راست دار این امکان میسر نیست.
- در مدل اکسٹریم یک آتل اضافی در پشت دست قرار گرفته است تا به تثبیت بیشتر مج دست کمک کند.



Foot



Open Toe Cast Sandal

General: 151103




مواد سازنده:

فوم، پلی استر، نایلون، پلی پروپیلن

جدول سایز بندی:

براساس سایز کفش کودک از جدول زیر سایز مناسب را انتخاب نمایید.

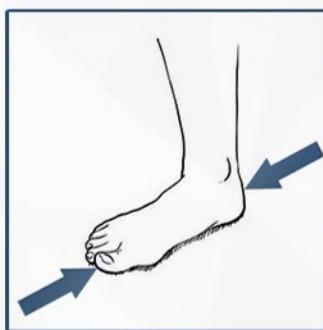

S

26 - 29 cm (10.24-11.42")

M

29 - 32 cm (11.42-12.59")

L

32 - 35 cm (12.59-13.78")

XL

35 - 38 cm (13.78-14.96")

نام محصول: کفش زیر گچ

در برخی موارد هنگام شکستگی پا از گچ برای ثابت نگه داشتن استخوان پا و جوش خوردن مناسب استخوان استفاده می‌کنند. در هنگام گچ گرفتگی پا، کفش فرد اندازه پای او نیست و باید از کفش زیر گچ استفاده کرد. کفش زیر گچ پا برای محافظت از سایش و پارگی گچ و همچنین جلوگیری از کشیشدن گچ پا استفاده می‌شود. محافظت گچ می‌تواند برای افرادی که پای خود را بر اثر شکستگی گچ گرفته‌اند، بسیار مفید باشد. بدین ترتیب به راحتی می‌توان مطمئن بوده که گچ خراب نمی‌شود زیرا اگر گچ مشکل پیدا کند، شکستگی به خوبی ترمیم نخواهد شد. با توجه به اندازه‌های متنوعی که کفش زیر گچ کیورد دارد، می‌توان این محصول را برای هر سنی تهیه نمود.

موارد استفاده:

- برای شکستگی های گچ گرفته شده پا.
- جلوگیری از سر خوردن، ترک خوردن و یا خراب شدن گچ پا.

ویژگی‌ها:

- دارای پنجه و پاشنه باز به منظور تسهیل عبور هوا.
- ساخته شده از زیره آجدار جهت جلوگیری از سر خوردن در زمان استفاده.
- دارای شش ماه گارانتی

CURED®

HEALTH IS WHAT WE REPRESENT



P.O. BOX: 49175-715 Golestan State, Iran.
Mfr. Addr: Sepid Tan Parniyan Pouyesh Co,
Farhang St, Karimabad Village, Golestan
State, Iran. P. Code: 4933147878



www.curedmedical.com
www.curedmedical.ir
info@curedmedical.com

